

Liebe deine Lücken!



Putz täglich die Zähne und
auch dazwischen – mit TePe.



TePe[®]

Kleine Bürste, große Wirkung!

Für ein gesundes Lächeln ist die tägliche, gründliche Mundhygiene das A und O. Doch sollten Sie hierbei nicht nur auf Ihre Zahnbürste vertrauen. Neben Zahnseide zählen vor allem Interdentalbürsten zu den Produkten, die eine optimale Reinigung der Zahnzwischenräume ermöglichen. Und wo sie oder ein EasyPick nicht hineinpassen, kann Zahnseide eine Alternative sein. In dieser Broschüre erfahren Sie, warum die Zahnbürste allein nicht ausreicht und Interdentalreinigung so wichtig ist.

Zahnärzte empfehlen TePe – und das aus gutem Grund.

TePe Produkte werden gemeinsam mit zahnmedizinischen Experten entwickelt und erfüllen so höchste Ansprüche: in der Zahnarztpraxis, zu Hause und unterwegs.

Nr. 1

von Zahnärzten
empfohlen

Wissens 2021, TePe Brand Monitor Deutschland




Täglich ran an die Zahnzwischenräume


Eine Zahnbürste allein reinigt nur drei von fünf Seiten eines Zahns – also ca. 60% der Zahnoberflächen. Die anderen ca. 40% liegen in den Zahnzwischenräumen und müssen ebenso gereinigt werden. Auch dort entstehen schädliche Beläge, welche zu Zahnfleischentzündungen und Karies führen. Diese Entzündungen fördern Parodontitis und können so zur Entstehung von Allgemeinerkrankungen beitragen. Beugen Sie deshalb vor und reinigen Sie auch täglich Ihre Zahnzwischenräume, wie vom zahnmedizinischen Fachpersonal empfohlen.




Interdentalbürsten füllen mit ihren Borsten den gesamten Zahnzwischenraum aus und reinigen so besonders effizient.

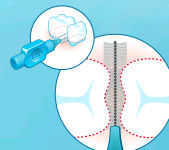

Interdentalbürste

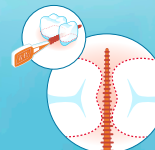

EasyPick

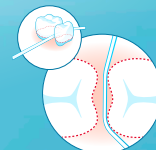

Zahnseide

Tipp:

Die Experten Ihrer Zahnarztpraxis helfen Ihnen gerne bei der Auswahl und richtigen Anwendung des optimalen Produkts für Ihre Bedürfnisse.

Lückenlos sauber

Dieser Step-by-Step Guide hilft Ihnen dabei, ein nahezu 100%iges Reinigungsergebnis zu erzielen und so Ihr gesundes Lächeln zu erhalten.



Step 1
Zahnwischnräume mit Interdentalbürsten gründlich reinigen



Step 2
Besonders enge Zahnwischnräume mit Zahnseide reinigen



Step 3
Mit der Zahnbürste und Zahnpasta Beläge auf den Zähnen und am Zahnfleischrand entfernen



Step 4
Bakterien auf der Zungenoberfläche mit dem Zungenreiniger entfernen



Step 5
Mit einer Mundspülung für frischen Atem sorgen

So wenden Sie Interdentalbürsten an



1. Die Bürste vorsichtig zwischen den Zähnen einführen und einige Male vor und zurück bewegen.
2. Bürstenhals oder Draht (je nach Größe) kann zur besseren Erreichbarkeit der hinteren Zwischenräume etwas vorgebogen werden.
3. Die Bürste während und nach der Reinigung mit Wasser abspülen und sie wechseln, sobald die Borsten abgenutzt sind.



Entdecken Sie unsere Produktvielfalt auf tepe.com/de



Eine gute Wahl

Zahnpflegeprodukte von TePe

Wir von TePe entwickeln hochwertige Mundpflegelösungen, die gut für Mensch und Umwelt sind. Deshalb werden unsere Produkte:

- In Schweden mit 100% Ökostrom produziert
- Mit nachwachsenden Rohstoffen hergestellt
- In 100% recycelbaren Verpackungen hygienisch verpackt
- Gemeinsam mit zahnmedizinischen Experten entwickelt

Mehr zu unseren Nachhaltigkeitsinitiativen erfahren Sie in unserem Nachhaltigkeitsbericht auf tepe.com/de/nachhaltigkeit

Set für die gründliche Mundhygiene


Reinigung der Zahnzwischenräume

Nehmen Sie sich täglich einige Minuten Zeit, um Ihre Zahnzwischenräume zu reinigen und Ihr Zahnfleisch frisch und gesund zu erhalten.

TePe® Interdentalbürste/TePe Angle™ (1) das effizienteste und wirksamste Mittel für die Entfernung von Plaque. Auch erhältlich in Extra Soft, für besonders empfindliches Zahnfleisch und sensible Zahnhälse.




TePe EasyPick™ (2) schnelle und einfache Lösung für die Zahnzwischenraumreinigung zu Hause oder unterwegs.

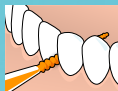

TePe GOOD Mini Flosser™ (3) handlicher Zahnseide-Stick aus nachwachsenden Rohstoffen für eine einfache Anwendung.



TePe® Dental Floss (4) Zahnseide aus recycelten Wasserflaschen, besonders geeignet für enge Zahnzwischenräume. Mit Minzgeschmack für ein frisches Mundgefühl.

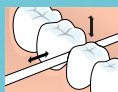

Zahnbürsten & Zahnpasta

Ein wichtiger Schritt bei der täglichen Reinigung ist selbstverständlich auch das Zähneputzen. Wählen Sie je nach Bedarf eine Zahnbürste mit weichen Borsten und eine milde fluoridhaltige Zahnpasta für eine sanfte Reinigung.

TePe Supreme™ (5) mit konischem Borstenfeld in zwei Längen, um den Zahnfleischrand besser zu reinigen. Mit nachwachsenden Rohstoffen hergestellt.

TePe Daily™ (6) sanft schäumende, fluoridhaltige Zahnpasta für Erwachsene und Kinder ab 7 Jahren. Ohne SLS, ohne Titandioxid. Mit mildem Minzgeschmack. Bei sensiblem Zahnfleisch oder Mundtrockenheit eignet sich alternativ TePe Pure™.



Unangenehmen Atem vermeiden

Mundgeruch wird häufig durch Bakterien auf der Zunge verursacht. Ein paar Züge mit einem Zungenreiniger können helfen.

TePe Zungenreiniger (7) gegen Mundgeruch, für eine bessere Mundhygiene.



Zahnputztest

TePe PlaqSearch™ (8) zeigt Ihnen auch schwer zu findenden Zahnbelag an. Tablette kauen, entstehende Flüssigkeit auf den Zahnoberflächen verteilen und danach den Mund ausspülen. Die Verfärbungen zeigen, wo Sie noch gründlicher putzen sollten.



Erhältlich in Ihrer Apotheke



Made in Sweden

TePe Interdentalprodukte

Original



| | | | | | |
|---------------|---|----------------|---|---------------|---|
| 0,4 mm | DE 07641185 AT 3698509 CH 5787329 | 0,45 mm | DE 07641191 AT 3698490 CH 5787387 | 0,5 mm | DE 07641305 AT 3698449 CH 5787335 |
| 0,6 mm | DE 07641311 AT 3698225 CH 5787341 | 0,7 mm | DE 07641328 AT 3698366 CH 5787364 | 0,8 mm | DE 07641386 AT 3698461 CH 5787358 |
| 1,1 mm | DE 07641392 AT 3698484 CH 5787370 | 1,3 mm | DE 07641423 AT 3698455 CH 6761674 | 1,5 mm | DE 07641446 AT 3698478 CH 7169340 |

Extra Soft



| | | | | | |
|----------------|---|---------------|---|---------------|---|
| 0,45 mm | DE 09724768 AT 3995756 CH 5787430 | 0,5 mm | DE 09724805 AT 3995762 CH 5787447 | 0,6 mm | DE 09724834 AT 3995779 CH 5787453 |
| 0,7 mm | DE 09724840 AT 3995785 CH 5787476 | 0,8 mm | DE 09724863 AT 3995791 CH 5787482 | 1,1 mm | DE 09724892 AT 3995816 CH 5787499 |

Angle



| | | | | | |
|---------------|---|----------------|---|---------------|---|
| 0,4 mm | DE 07708682 AT 3793260 CH 5782929 | 0,45 mm | DE 07708713 AT 3793277 CH 5782935 | 0,5 mm | DE 07708848 AT 3793283 CH 5782941 |
| 0,6 mm | DE 07708860 AT 3793308 CH 5782958 | 0,7 mm | DE 07708877 AT 3793314 CH 5782964 | 0,8 mm | DE 07709032 AT 3793320 CH 5782970 |

EasyPick



| | | | | | |
|-------------|---|------------|---|-----------|---|
| XS/S | DE 10731992 AT 4261051 CH 6687529 | M/L | DE 10732017 AT 4261068 CH 6687512 | XL | DE 16381441 AT 5264212 CH 7816358 |
|-------------|---|------------|---|-----------|---|

GOOD Mini Flosser

| | |
|--|---|
| | DE 15400455 AT 5070376 CH 7769631 |
|--|---|



Dental Floss

| | |
|--|---------------------------------------|
| | DE 18326713 AT 5711071 CH n. e. |
|--|---------------------------------------|



TePe Spezialprodukte

PlaqSearch

| | |
|--|---------------------------------------|
| | DE 04807544 AT 4098013 CH n. e. |
|--|---------------------------------------|



Zungenreiniger

| | |
|--|---|
| | DE 15322643 AT 5053395 CH 7741064 |
|--|---|

Zur Bestellung in der Apotheke:

DE= PZN AT=PHZ CH=Pharmacode
n.e.= nicht in der Apotheke erhältlich

TePe D-A-CH GmbH

Langenhorner Chaussee 44 a
22335 Hamburg, Deutschland
Tel. DE: +49 (0)40 570 123-0
Tel. AT: +43 (0)15 444 044
Tel. CH: +41 (0)71 788 230 0
kontakt@tepe.com www.tepe.com

TePe Zahnbürsten



| | |
|----------------|---|
| Supreme | DE 17438120 AT 5456176 CH 7810391 |
|----------------|---|

TePe Zahnpasta

Pure, Milde Minze

| | |
|--|---------------------------------------|
| | DE 18250200 AT 5691629 CH n. e. |
|--|---------------------------------------|



Daily

| | |
|--|---------------------------------------|
| | DE 18250163 AT 5691598 CH n. e. |
|--|---------------------------------------|



Ausgewählte TePe Produkte sind auch in Drogerien, im Lebensmittel-einzelhandel oder online erhältlich. Die Verfügbarkeit kann je nach Land und Einkaufsstätte variieren.

