



© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.
Technische Änderungen sind vorbehalten.
Warenzeichen sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
oder ihrer jeweiligen Inhaber.

www.philips.de

Oktober 2021
22055

PHILIPS

sonicare

Oral Healthcare

Produktkatalog

Philips Sonicare | Philips Zoom

www.philips.de/zahnmedizin
www.philips.com/dentalshop

Inhalt

Philips Sonicare Schallzahnbürsten

Die Philips Sonicare Schalltechnologie	8–11
Philips Sonicare Schallzahnbürsten Übersicht	12–13
Philips Sonicare For Kids Connected	14–15

Philips Sonicare Bürstenköpfe

Philips Sonicare Bürstenköpfe Übersicht	16–18
---	-------

Philips Dentalshop

Philips Dentalshop	18
--------------------------	----

Philips Sonicare Produkte in der Übersicht

Alle Philips Sonicare Produkte auf einen Blick	22–23
--	-------

Philips Zoom Zahnaufhellung

Philips Zoom professionelle Zahnaufhellung	24
Philips Zoom – Das Wirkprinzip	25–26
Zahnaufhellung in der Praxis	27–29
Zahnaufhellung zu Hause	30–31

Philips Relief® ACP

Bei empfindlichen Zähnen	32–33
--------------------------------	-------

Philips Zoom Produkte in der Übersicht

Alle Philips Zoom Produkte auf einen Blick	34–35
--	-------

Philips Info & Service

Die richtige Putztechnik	36
So profitieren Sie mit Philips in Ihrer Praxis	37
Garantieprozess/Geld-zurück-Garantie	38
Kontaktmöglichkeiten bei Philips	39

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten. Technische
Änderungen sind vorbehalten.
Warenzeichen sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
oder ihrer jeweiligen Inhaber.

Artikelnummer: 22055

www.philips.de

Oktober 2021



9,6%

vom Philips
Jahresumsatz
fließt in Forschung
und Entwicklung

90 Millionen Stunden Entwicklung

machen Behandlungen
noch schonender

1,6 Milliarden Menschen

konnten wir
2019 das Leben
verbessern

12.200 Forscher

erleichtern
Ärzten ihre
Arbeit



Willkommen bei Philips. Für eine gesündere Welt

Seit über 100 Jahren entwickelt Philips Technologien und Produkte, die den Menschen helfen, gesünder zu leben, schneller wieder gesund zu werden und ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

Dank dieser Innovationen ist Philips heute in der Medizintechnik in vielen Bereichen Marktführer – unter anderem in der Patientenüberwachung, in der Ultraschalldiagnostik sowie in der Haut- und Mundpflege. Philips möchte Lösungen entwickeln, die tatsächlich vorhandene Bedürfnisse erfüllen. Deshalb fragen wir Klinikteams und Patienten, worauf es ihnen ankommt und durch welche Veränderungen ihre Arbeit und ihr Alltag erleichtert werden könnten.


Nutzen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit in der Praxis die Vorteile dieser Partnerschaft: Philips kann Ihnen Produkte zur professionellen Zahnpflege, Zahnreinigung und Zahnaufhellung anbieten, die von Zahnärzten empfohlen und von Patienten geschätzt werden. Entdecken Sie in unserem Katalog, wie Sie von Philips genauso profitieren können wie Ihre Patienten.

Die Philips Vision Begleiter im gesamten Gesundheitskontinuum

Wussten Sie, dass 70 % aller Gesundheitskosten für Diagnose und Behandlung ausgegeben werden? Es wird Zeit umzudenken. Wir brauchen einen ganzheitlichen Ansatz – mit Fokus auf Prävention, besseren Behandlungsergebnissen und der Integration von gesundem Lifestyle. Mit seinen Produkten und Services leistet Philips hier einen wichtigen Beitrag, um die Gesundheit zu erhalten, zu verbessern und das Gesundheitssystem insgesamt effizienter zu gestalten.

Gesunde Zähne, gesunder Körper

Vor allem die Zahngesundheit nimmt für Philips einen hohen Stellenwert ein. Verschiedene Studien haben darauf hingewiesen, dass Erkrankungen von Zähnen und Zahnfleisch Auswirkungen auf den restlichen Körper haben können. Eine gute Mundhygiene ist daher besonders wichtig und kann zu einem deutlich besseren Wohlbefinden Ihrer Patienten beitragen.

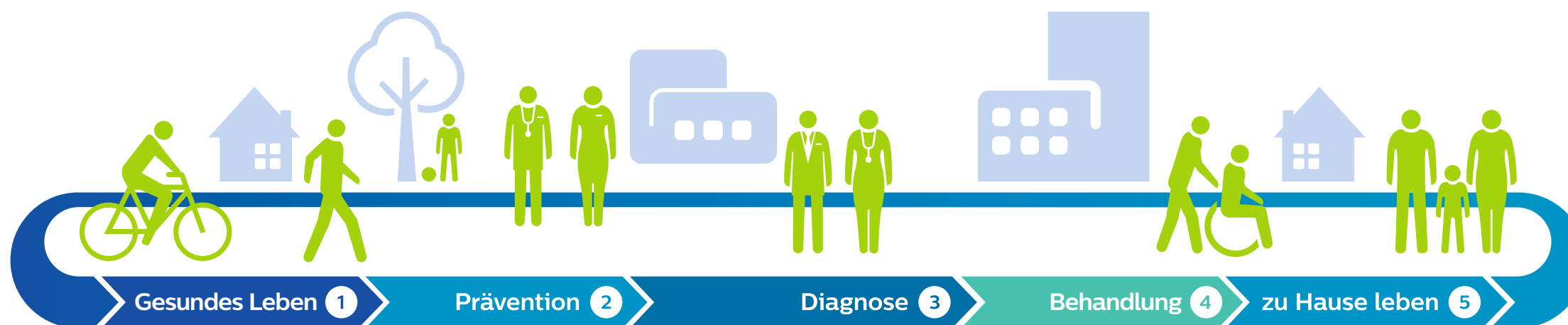

- 1 Wir unterstützen Menschen bei einer gesunden Lebensweise.
- 2 Wir helfen Menschen, für ihre eigene Gesundheit zu sorgen.
- 3 Wir sorgen für präzise Diagnosen, damit die Behandlung von Anfang an die richtige ist.
- 4 Wir ermöglichen wirksamere Therapien, schnellere Genesung und bessere Behandlungsergebnisse.
- 5 Wir unterstützen den Genesungsprozess und die Behandlung chronischer Krankheiten zu Hause.

Die Philips Mundpflegeprodukte


Ganzheitliche Mundpflege für Ihre Patienten

Professionelle Mundpflege ist ein wichtiger Bestandteil des Philips Portfolios – und geht über Schallzahnbürsten weit hinaus. Das Angebot umfasst viele Produkte, die sich auf ganzheitliche Weise einem gesunden schönen Lächeln verschrieben haben. Die Produkte bieten Ihnen und Ihren Patienten Lösungen, die speziell auf unterschiedliche Bedürfnisse und Indikationen ausge-

richtet sind – ob für die Anwendung zu Hause oder in der Praxis. Von diesem perfekt aufeinander abgestimmten Portfolio profitieren Sie genauso wie Ihre Patienten. Dabei können Sie jederzeit auf unsere Unterstützung bauen, denn wir garantieren Ihre Zufriedenheit mit umfangreichem Service.



Zahnreinigung
Philips Sonicare Schallzahnbürsten für ein perfekt sauberes Mundgefühl

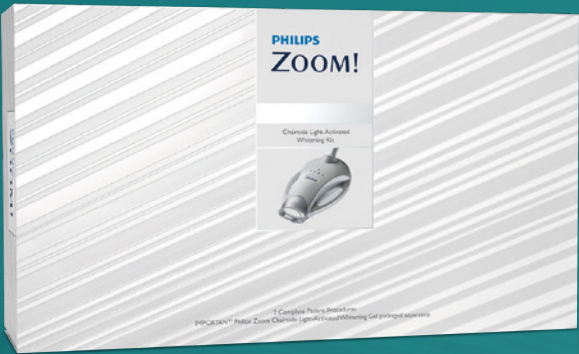

Zahnaufhellung in der Praxis
Philips Zoom für strahlend weiße Zähne auch bei stärkeren Verfärbungen



Take-Home Zahnaufhellung
Philips Zoom DayWhite und NiteWhite für eine bequeme Aufhellung der Zähne zuhause



Desensibilisierung
Relief® ACP zur Desensibilisierung von sensiblen Zähnen

Die sanfte Power der innovativen Philips Sonicare Schalltechnologie

Mit über 20 Millionen Anwendern weltweit hat sich Philips Sonicare zu einer der meistverkauften Marken für elektrische Premium-Zahnbürsten entwickelt. Auch beim zahnmedizinischen Fachpersonal wird die Philips Sonicare immer beliebter. So empfahlen 2018 rund 70 % aller Zahnärzte und Prophylaxe-Mitarbeiter in Deutschland ihren Patienten eine Philips Sonicare Schallzahnbürste.¹

So funktioniert die Philips Sonicare Schalltechnologie


Die Schalltechnologie sorgt für einen gründlichen Reinigungseffekt auch an schwer zugänglichen Stellen. Eine Vielzahl an feinen Vibrationen wird von dem Handstück auf den Bürstenkopf übertragen, der dann in hoher Geschwindigkeit anfängt zu schwingen. Der konturierte Bürstenkopf passt sich der Zahnreihe ideal an. Mit 62.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute bewegt sich eine Philips Sonicare Schallzahnbürste in 2 Minuten mehr als eine Handzahnbürste im ganzen Monat. Auf diese Weise entfernt sie bis zu 10x mehr Plaque als eine Handzahnbürste.²

Philips Sonicare Schallzahnbürsten reinigen sehr schonend, da sie drucklos über die Zähne geführt werden können.³ Dabei kommt es verglichen zur Anwendung von rotierend-oszillierenden Zahnbürsten zu einer deutlichen Reduktion von Zahnfleischentzündungen.^{4,5}

Wissenschaftlich belegt:

Überragende Reinigungsleistung – gesünderes Zahnfleisch


Prozentuale Plaquereduktion im Vergleich zum Ausgangswert
Woche 2 und Woche 6, insgesamt

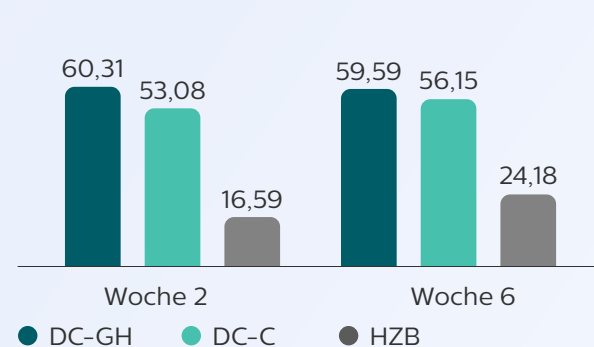

Schlussfolgerung:

Die Anwendung der Philips Sonicare DiamondClean Smart mit Premium Gum Care Bürstenkopf im Modus Gum Health (DC-GH) oder im Modus Clean (DC-C) war der ADA-Handzahnbürste bei der Reduktion von Zahnfleischentzündung und Zahnbelag nach zwei- bzw. sechswöchiger häuslicher Verwendung statistisch signifikant überlegen.

Prozentuale Reduktion der Gingivitis im Vergleich zum Ausgangswert
Woche 2 und Woche 6, insgesamt

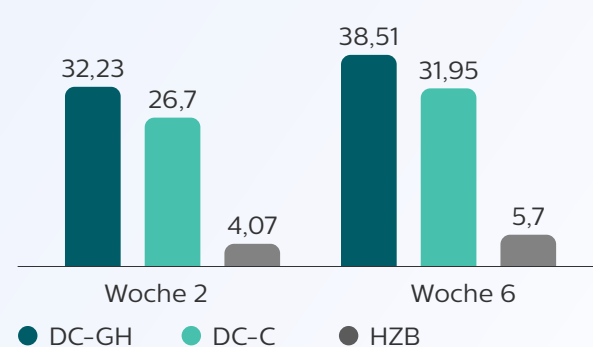

Schlussfolgerung:

Reduktion von Zahnbelag und Zahnfleischentzündung bei Anwendung der Philips Sonicare DiamondClean Smart mit Premium Gum Care Bürstenkopf im Vergleich zu einer Handzahnbürste.⁶



Tiefenreines Mundgefühl durch dynamischen Flüssigkeitseffekt

Die Hochgeschwindigkeitsbewegung der Borsten-spitzen und die Schwingungen des Bürstenkopfes sorgen gemeinsam für die dynamische Flüssigkeitsströmung von Philips Sonicare. Zahnpasta und Speichel werden sanft zu einer mit Sauerstoff angereicherten, schäumenden Flüssigkeit vermischt und durch die Zahnzwischenräume gepresst. So wird die Reinigungsleistung auch an schwer erreichbaren Stellen unterstützt – genau dort, wo sich Plaque-Bakterien ansammeln können.

Rotierende elektrische Zahnbürste: Philips Sensiflex



Ohne Schalltechnologie

Philips Sonicare Schallzahnbürste: FlexCare Platinum



Mit Schalltechnologie

¹ Quelle: DocCheck-Studie zum Empfehlungsverhalten bei Zahnbürsten, im Auftrag der Philips GmbH, Stand November 2018, n=201

² Quelle: Jenkins W, Souza S, Ward M, Defenbaugh J, Milleman KR, Milleman JL. Comparison of Plaque and Gingivitis Reduction by Philips Sonicare FlexCare Platinum with Premium Plaque Control Brush Head and a Manual Toothbrush. J Clin Dent 2017; 28 (Spec Iss A): A7-12.

³ Quelle: Schmidt JC, Astasov-Frauenhoffer M, Hauser-Gerspach I et al. Efficacy of various side-to-side toothbrushes for noncontact biofilm removal Clin Oral Invest (2014) 18:793–800 DOI 10.1007/s00784-013-1047-7

⁴ im Vergleich Philips Sonicare DiamondClean mit AdaptiveClean Bürstenkopf und Oral-B 7000 mit CrossAction-Bürstenkopf

⁵ Quelle: Starke M et al. A Comparison of the Effect of Two Power Toothbrushes on the Gingival Health and Plaque Status of Subjects with Moderate Gingivitis J Clin Dent 2017;28 (Spec Iss A): A29–35

⁶ Milleman J, Milleman K, Olson M, Ou S, Souza S, Starke M, Ward M, Salus Research, Inc. USA (J Clin Dent 2019;30(Spec Iss A)A16–23)

Philips Sonicare

Schallzahnbürsten reinigen sanft, aber effektiv



Bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung¹

Philips Sonicare Zahnbürsten entfernen Plaque mit Schalltechnologie von den Zähnen Ihrer Patienten und reinigen mit 62.000 Bürstenkopfbewegungen bis in die Tiefe.



Bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch²

Philips Sonicare Zahnbürsten nutzen eine sanfte Schwingbewegung, um Plaque vom Zahnfleischrand zu entfernen und reinigen mit geringem Druck zur Schonung von empfindlichem Zahnfleisch.



Bis zu 100 % weniger Verfärbungen in nur 3 Tagen³

Philips Sonicare Zahnbürsten verbessern nicht nur die Mundgesundheit Ihrer Patienten, sie verhelfen auch zu einem strahlenden Lächeln. Durch tägliches Putzen mit einer Philips Sonicare Zahnbürste können bis zu 100 % mehr Verfärbungen entfernt werden.³

¹ Im Deep Clean-Modus mit einem C3 Premium Plaque Defence Bürstenkopf im Vergleich zu einer Handzahnbürste.

² Im GumHealth-Modus mit einem G3 Premium Gum Care Bürstenkopf im Vergleich zu einer Handzahnbürste.

³ Im White+-Modus mit einem W3 Premium White Bürstenkopf im Vergleich zu einer Handzahnbürste mit einer führenden Zahnpasta zur Zahnaufhellung.

Dank vielfältiger Funktionen

für jeden Patienten die richtige Lösung



Putzprogramme

Es sind bis zu 5 verschiedene Putzprogramme auswählbar

- **Clean:** Hervorragende Reinigung in 2 Minuten.
- **White+:** Entfernt Verfärbungen der Zahnoberflächen.
- **GumHealth/Gum Care:** Stimulierung des Zahnfleisches.
- **DeepClean+:** Tiefenwirksame Reinigung.
- **TongueCare:** Wirksame Reinigung der Zunge.



Intensitätsstufen

Bis zu 3 Intensitätsstufen für individuelle Zahnputzerlebnisse auswählbar. Höhere Intensität für noch gründlichere Reinigung oder niedrigere Intensität für empfindliche Zähne.



Andruckkontrolle

Die Andruckkontrolle verhindert zu starken Druck beim Putzen durch ein sanftes Signal. Wenn zu viel Druck ausgeübt wird, vibriert das Handstück der Zahnbürste sanft. So wird daran erinnert, weicher zu bürsten und dem Bürstenkopf die Arbeit zu überlassen. 7 von 10 Personen verhalf diese Funktion zu einem besseren Putzverhalten.



4-Quadranten-Timer

Unser 4-Quadranten-Timer teilt Ihnen mit, wenn Sie ausreichend Zeit mit der Reinigung jeder Mundpartie verbracht haben, während unser 2-Minuten-Timer anzeigt, wann Sie die empfohlenen zwei Minuten erreicht haben.



Sonicare BrushSync-Technologie

Die Zahnbürste kennt den optimalen Modus und die richtige Intensitätseinstellung für jeden Bürstenkopf. Die Technologie merkt sich zudem, wie lange Sie Ihren Bürstenkopf bereits verwenden. Eine Leuchte auf dem Handstück erinnert Sie, wenn es Zeit für einen Wechsel ist, um das optimale Reinigungsergebnis zu erreichen.



Philips Sonicare-App

Smart-Sensoren übertragen die Putzdaten an die Philips Sonicare-App, die ein individuelles Coaching und Feedback für eine umfassende Zahnreinigung bietet.

Philips Sonicare Schallzahnbürsten Übersicht



¹Im Vergleich zu einer Handzahnbürste.

Studien aus dem Sonicare Studienbuch: Sonicare for Kids: Milleman J, Putt M, Olson M, Master A, Jenkins W, Schmitt P, Strate J. International J Pediatric Dent. 2009; 19:s1. EasyClean: Milleman J., Defenbaugh J., Mwatha T., Souza S., Ward M., Jenkins W., Archivdaten, April 2014. HealthyWhite+: Argosino K, Jenkins W, Milleman J, Nelson M, Souza S, Ward M, Archivdaten, 2012. DC + FCP: Milleman J., Milleman K., Argosino K, Mwatha A, Ward M., Souza S., Jenkins W., Archivdaten, 2014

	Diamond-Clean Smart	Diamond-Clean 9000	ExpertClean	Protective-Clean 4700	Protective-Clean 4300	EasyClean
	Rundumpflege für eine bessere Mundgesundheit	Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang	Ein professionelles Reinigungslevel für langfristige Mundgesundheit	Hellt Zähne in nur einer Woche auf	Sanfte Reinigung für ein gesundes Zahnfleisch	Der Eintritt in die Schallzahnbürsten-Welt
Erwiesene Wirksamkeit						
Plaque-Entfernung bis zu¹	10x mehr	10x mehr	10x mehr	10x mehr	7x mehr	6x mehr
Patentierter Schalltechnologie						
Bürstenbewegungen/Minute	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Anzahl Putzprogramme	5	4	3	2	1	1
Intensitätsstufen	3	3	3	3	2	–
Putzprogramme						
Clean: Hervorragende Reinigung in 2 Minuten.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
White+: Entfernt Verfärbungen der Zahnoberflächen.	✓	✓	–	–	–	–
GumHealth/Gum Care: Stimulierung des Zahnfleisches.	✓/–	✓/–	✓/–	–/✓	–	–
DeepClean+: Tiefenwirksame Reinigung.	✓	✓	✓	–	–	–
TongueCare: Wirksame Reinigung der Zunge.	✓	–	–	–	–	–
Benutzerfreundlichkeit						
Sonicare App: Intelligentes Coaching in der App hilft dabei, die Mundpflege-Routine dauerhaft zu verbessern.				–	–	–
2-Minuten-Timer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Akustischer Quadranten-Timer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Intelligente Bürstenkopferkennung: Automatische Wahl von Intensität und Putzprogramm/Erinnerungsfunktion für Bürstenkopfwechsel	✓/✓	✓/✓	✓/✓	–/✓	–/✓	–/✓
Smart Andruckkontrolle: Warnt vor übermäßigem Druck beim Putzen durch ein optisches und akustisches Signal.	✓	✓	✓	✓	✓	–
Moderne Akkutechnologie						
Nutzungsdauer in Wochen	Bis zu 2	Bis zu 2	Bis zu 3	Bis zu 2	Bis zu 2	Bis zu 2
Einzigartige Ausstattung						
Innovatives Ladeglas mit Induktionstechnologie	✓	✓	–	–	–	–
Reiseetui	✓	✓	✓	✓	–	–

Philips Sonicare For Kids Connected

Fördert die Compliance bei Kindern – für sehr gute Ergebnisse beim Zähneputzen



Interaktive Coaching-App

Animiert Kinder zum selbstständigen Zähneputzen



Kontrolle für die Eltern

Bis zu 20 Putzdurchgänge können offline gespeichert werden und ermöglichen Eltern, die Leistung und Fortschritte ihres Kindes nachzuvollziehen.



KidTimer Funktion

Der KidTimer hilft Kindern, die empfohlene zweiminütige Putzdauer zu erreichen. Er verlängert die Putzzeit fortschreitend innerhalb der ersten 90 Tage¹.



KidPacer Musiktöne

Töne signalisieren, zum nächsten Putzbereich im Mund zu wechseln bzw. das Zähneputzen zu beenden.



2 unterschiedliche Bürstenkopfgößen

Die Bürstenkopfgößen wurden speziell für die behutsame Reinigung der Zähne in verschiedenen Entwicklungsstufen konzipiert.



2 kinderfreundliche Putzeinstellungen

Zwei Reinigungsstufen sorgen für eine sanfte, altersgerechte Reinigung: Die niedrige Stufe ist ideal für Kinder ab 4 Jahren, die höhere Stufe für Kinder ab 7 Jahren.


Sie und die Eltern Ihrer kleinen Patienten haben ein gemeinsames Ziel: Kinder sollen effektive Putzgewohnheiten entwickeln, die eine Basis für ihre Mundgesundheit bilden. Dank Bluetooth-Technologie und der interaktiven Coaching-App werden Kinder spielend zum selbstständigen und gründlichen Zähneputzen aller Quadranten im Mund animiert.

Klinische Tests beweisen: Philips Sonicare For Kids Connected entfernt mehr Plaque als eine Handzahnbürste für Kinder.

Philips Sonicare For Kids hat in klinischen Tests bewiesen, dass sie bis zu 75 % mehr Plaque an schwer zugänglichen Stellen entfernt als eine Kinderhandzahnbürste – und sie hat sich für Kinder im Alter von 4 bis 10 Jahren als sicher und sanft bewährt^{1,2}. 91% der befragten Eltern, die selbst Zahnärzte sind, bevorzugen Philips Sonicare For Kids für ihre eigenen Kinder.³



Mit
unserer
Coaching-App
für die
Kleinen

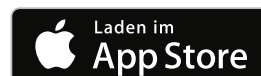


Philips Sonicare For Kids


Wirksame Plaque-Entfernung

Vergleich der Wirksamkeit der Plaque-Entfernung der Philips Sonicare For Kids und einer Handzahnbürste in einer von Dentalhygienikerinnen durchgeführten Zahnputzstudie.

Vergleich der Wirksamkeit im Alter von 4–7 Jahren

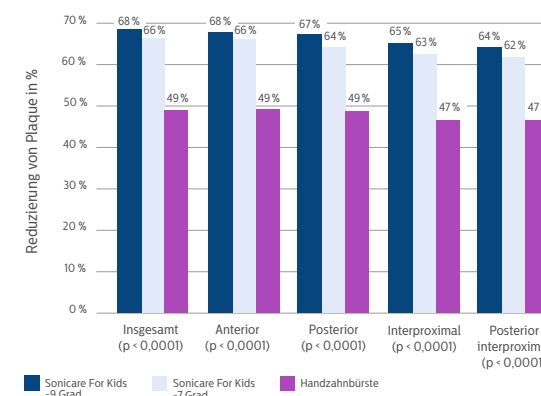

Vergleich der Wirksamkeit im Alter von 7–10 Jahren

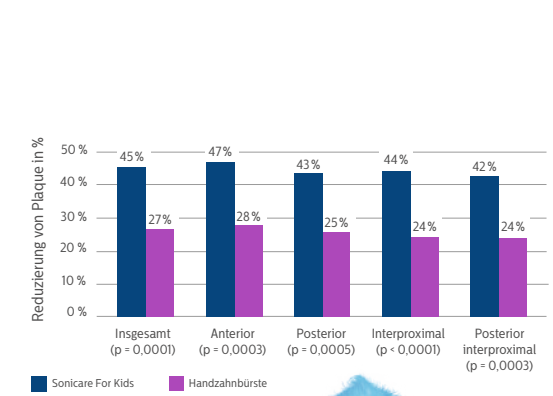

Plaque-Reduzierung, angepasster Mittelwert in Prozent. Squirt-Prototyp 7 und 9 Grad verglichen mit einer Handzahnbürste. **Äquivalent von 2 Minuten**

Schlussfolgerung: Philips Sonicare For Kids Connected entfernt bei Kindern im Alter von 4–7², bzw. 7–10³ Jahren bei einem von Dentalhygienikerinnen durchgeführten Zähneputzen insgesamt bedeutend mehr Plaque als die Oral-B Stages 3, bzw. 4, Handzahnbürste. Sonicare For Kids ist nachweislich sicher und schont das Mundgewebe.

¹Im Gegensatz zur eigenständigen Nutzung einer Handzahnbürste.

²Quelle: Pelka M., DeLaurenti M., Master A., Jenkins W., Strate J., Wei J., Schmitt P. International J Pediatric Dent. 2009; 19: s1.

³Quelle: Millemann J., Putt M., Olson M., Master A., Jenkins W., Schmitt P., Strate J. International J Pediatric Dent. 2009; 19: s1.

¹ Quelle: Pelka M., DeLaurenti M., Master A., et al. Int J Pediatr Dent. 2009; 19: s1.

² Quelle: Millemann J., Putt M., Olson M., et al. Int J Pediatr Dent. 2009; 19: s1.

³ Quelle: Sonicare in-home survey of U.S. dental professionals with children ages 4–10.

Der richtige Bürstenkopf für jedes Bedürfnis



Entfernen bis zu 10 x mehr Plaque
Im Vergleich zur Handzahnbürste. Premium Plaque Defence Aufsteckbürsten sind unsere besten für Entfernung von Plaque. Am oberen Ende des Kopfes stehen dichte Borsten hervor, um Plaque selbst an schwer zu erreichenden Stellen effektiv zu entfernen. Die gummierte Fassung des Kopfes erhöht den Oberflächenkontakt.



Automatische Erinnerung
Bürstenköpfe verlieren durch Abnutzung über Monate hinweg ihre Reinigungseigenschaften. Die blauen Indikatorborsten verblassen bei Gebrauch und zeigen so genau an, wann die Filamente verbraucht sind und ein Auswechseln notwendig wird. Die Empfehlung ist alle 3 Monate.



Einfacher Wechsel
Ein Stecksystem ermöglicht einen schnellen und leichten Austausch. Die Bürstenköpfe sind frei kombinierbar mit allen Philips Sonicare Schallzahnbürsten.



Philips Sonicare Premium Bürstenköpfe Mit intelligenter Bürstenkopferkennung

Dank der weichen, flexiblen Gummiseiten passen sich die Borsten perfekt der Oberflächenform der einzelnen Zähne an. Die adaptive Reinigungstechnologie absorbiert übermäßigen Druck und ermöglicht eine sanfte Führung entlang des Zahnfleischrandes. Ein Mikrochip innerhalb der RFID-Aufsteckbürsten kommuniziert mit dem kompatiblen Handstück, um automatisch die optimale Putzeinstellung auszuwählen.²

Philips Sonicare Bürstenkopf-Übersicht

	Name	Bürstenkopf erhältliche Größen	Härte	Erhältliche Farben	Besonderheit	Nutzen
Reinigung	C3 Premium Plaque Defence		Medium		Bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung ¹	Überragende Plaque-Entfernung und tiefenwirksame Reinigung, auch an schwer erreichbaren Stellen. Smart-Bürstenkopferkennung. ²
	C1 ProResults		Medium		Bis zu 2 x mehr Plaque-Entfernung ¹	Effektive Reinigung durch eine an die Zahnkonturen angepasste Bürstenform.
Zahnfleisch	G3 Premium Gum Care		Soft		Bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch ¹	Gesünderes Zahnfleisch dank schonender Reinigung entlang des Zahnfleischrandes. Smart-Bürstenkopferkennung. ²
Aufhellung	W3 Premium White		Medium		Entfernt bis zu 5 x mehr Verfärbungen ¹	Weißere Zähne dank dichter Borsten, die Plaque und Verfärbungen entfernen. Smart-Bürstenkopferkennung. ²
	W2 Optimal White		Medium		Entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen ¹	Strahlend weiße Zähne durch diamantförmige Borsten und mittig angeordnetem Borstenblock.
Specials	i InterCare		Medium-Soft		Bis zu 7 x mehr Plaque-Entfernung ¹	Saubere Zahnzwischenräume und gesünderes Zahnfleisch durch extralange Borsten.
	S Sensitive		Ultra-Soft		Bis zu 50 % mehr Plaque-Entfernung ¹	Besonders sanfte Reinigung bei empfindlichen Zähnen durch extraweiche Borsten.
	For Kids		Extra-Soft		Bis zu 75 % mehr Plaque-Entfernung ¹	Behutsame Reinigung für Kinderzähne durch weiche Borsten. In zwei verschiedenen Größen für Kinder ab 4 und Kinder ab 7 Jahren.




Bürstenköpfe mit RFID-Technologie
RFID ist eine smarte, innovative Mikrochiptechnologie. Bürstenköpfe mit dem RFID-Logo verbinden sich automatisch mit kompatiblen Handstücken und ermöglichen so, dass alle Funktionen im vollen Umfang genutzt werden können, wie beispielsweise die Bürstenkopfwechselanzeige oder die automatische Putzprogrammwahl.


¹ Im Vergleich zu einer Handzahnbürste.
² Smart-Bürstenkopferkennung nur mit kompatiblen Handstücken möglich.

Bestellen Sie jetzt auch über unseren **Dental Professional Onlineshop**

1. Gehen Sie auf unsere Website:
www.philips.com/dentalshop

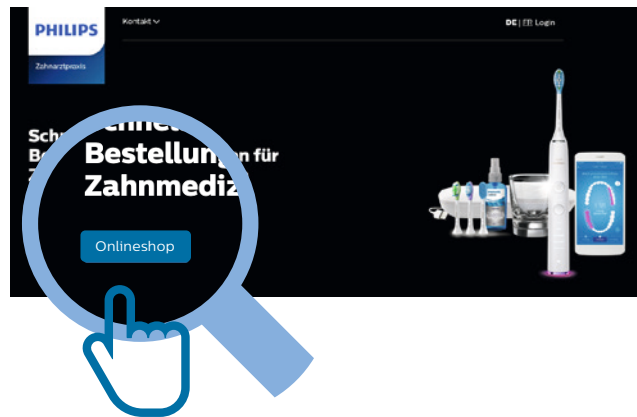

2. Klicken Sie auf Onlineshop:
Sie sind **bereits Kunde?**
Geben Sie Ihre Kunden-
nummer und Postleitzahl
ein und klicken Sie auf
Konto erstellen

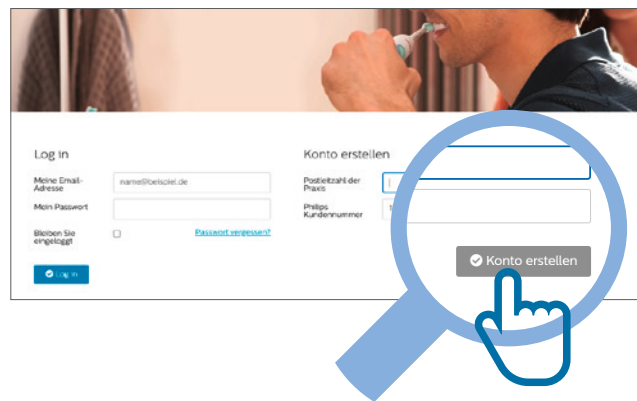

3. Anschließend erhalten
Sie eine **E-Mail zur
Registrierung**.
Dies kann einige Minuten
dauern.

Tipp: Wenn Sie **keine
Registrierungsmail** erhalten,
dann schauen Sie im
Spam-Ordner nach.

4. Um den Vorgang abzuschließen ...
bestätigen Sie Ihre E-Mail Adresse mit **E-Mail registrieren**. **Gratulation!**
Nun können Sie Ihre Bestellungen ganz einfach, übersichtlich und
schnell über unseren Onlineshop erstellen.

Informationen zu unseren Online Schulungen sowie unsere
Termine finde Sie unter: www.philips.com/dentalshop

Überzeugen Sie Ihre Patienten

Das Philips Sonicare
Testprogramm lässt Ihre
Patienten die sanfte und
effektive Reinigung der
Schalltechnologie erleben.



Starten Sie jetzt Ihr
Testprogramm unter:
www.philips.com/dentalshop



PHILIPS

sonicare

**Individuelles
Design**

dank der 8 enthaltenen,
witzigen Aufkleber




Der Start in eine gesunde Putzroutine: Philips Sonicare For Kids Elektrische Schallzahnbürste

- Mehr Spaß am Zähneputzen mit einer elektrischen Kinderzahnbürste
- Gründliche und sanfte Reinigung aufgrund der innovativen Schalltechnologie
- Fördert richtiges Putzen mit kindgerechter Ausstattung und innovativen Funktionen



**Interaktiver
Putz-Trainer**

begeistert Kinder für
das Zähneputzen

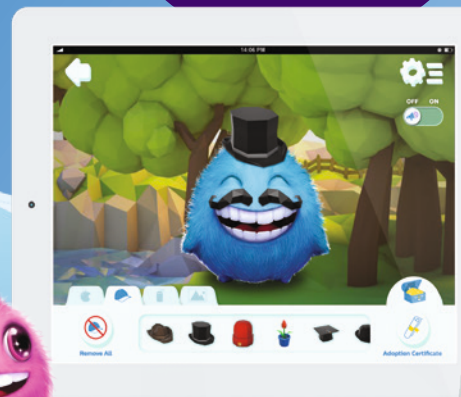

innovation  you

PHILIPS

Zoom!

Professionelle Zahnaufhellung

Zaubern Sie Ihren Patienten ein natürlich weißes Lächeln

Vereinbaren Sie jetzt Ihren kostenlosen und individuellen Termin auf www.philips.com/dentalshop und lassen Sie sich von einer geschulten Außendienst-Fachkraft die Philips Zoom-Technologie eindrucksvoll live vorführen.

innovation  you

Alle Philips Sonicare Produkte auf einen Blick

Philips Sonicare Schallzahnbürsten



Produkt	Philips Sonicare DiamondClean Smart	Philips Sonicare DiamondClean 9000	Philips Sonicare ExpertClean 7300	Philips Sonicare ProtectiveClean 4700
Artikelnummer	HX9924/03 ☐ HX9924/13 ☒	HX9913/17	HX9601/03	HX6483/52
Lieferumfang	1x Handstück 3x Premium Bürstenköpfe 1x Zungenreiniger 1x BreathRx Spray 1x Ladeglas 1x Reiseladeetui	1x Handstück 2x C3 Premium Plaque Defence 1x Ladeglas 1x Reiseladeetui	1x Handstück 1x C3 Premium Plaque Defence 1x G3 Premium Gum Care 1x Reiseetui	1x Handstück 1x G3 Premium Gum Care 1x C3 Premium Plaque Defence 1x W2 Optimal White Mini 1x Reiseetui



Produkt	Philips Sonicare ProtectiveClean 4300	Philips Sonicare EasyClean	Philips Sonicare For Kids Connected
Artikelnummer	HX6807/28	HX6512/45	HX6322/04
Lieferumfang	1x Handstück 1x W2 Optimal White Standard 1x Ladestation	1x Handstück 2x ProResults Plaque-Schutz 1x Ladestation	1x Handstück 1x Bürstenkopf Ab 3 Jahren 1x Bürstenkopf Ab 7 Jahren 1x Ladestation 8x Sticker

Philips Sonicare Praxis-Testgeräte¹



Produkt	Philips Sonicare DiamondClean Smart	Philips Sonicare ExpertClean 7300	Philips Sonicare ProtectiveClean 4300
Artikelnummer	HX9944/13	HX9641/01	HX6848/98
Lieferumfang	1x Handstück 1x Premium Plaque Defense 1x Premium Gum Care 1x Zungenreiniger 1x Ladering	1x Handstück 1x C3 Premium Plaque Defence 1x G3 Premium Gum Care 1x Ladestation	1x Handstück 1x Premium Gum Care 1x Optimal White Mini 1x InterCare 1x Ladestation

Philips Sonicare Bürstenköpfe



Produkt	G3 Premium Gum Care	C3 Premium Plaque Defence	W2 Optimal White Standard	W2 Optimal White Mini
Artikelnummer	4er-Pack White HX9054/17 4er-Pack Black HX9054/33	4er-Pack White HX9044/17 4er-Pack Black HX9044/33	4er-Pack White HX6064/10 4er-Pack Black HX6064/11 6er-Pack White HX6066/10	4er-Pack White HX6074/27
Farbe	☐ ☒	☐ ☒	☐ ☒	☐



Produkt	InterCare Standard	Sensitive Standard	C1 ProResults Standard	For Kids 3+ For Kids 7+
Artikelnummer	4er-Pack HX9004/10	4er-Pack HX6054/07	4er-Pack HX6014/07 8er-Pack HX6018/07	4er-Pack Ab 3 Jahren HX6034/33 Ab 7 Jahren HX6044/33
Farbe	☐ ☐	☐	☐	

¹Maximal 6 Stück pro Praxis pro Jahr.



Philips Zoom Zahnaufhellung

Strahlend weißere Zähne für jeden Patienten

8 von 10 Ihrer Patienten wünschen sich ein strahlend weißes Lächeln!¹ Ein strahlendes Lächeln macht attraktiv, gibt Selbstvertrauen und öffnet Türen. Deshalb ist es für viele Menschen wichtig, schöne, natürlich weiße Zähne zu haben. **Knapp die Hälfte** der Deutschen schaut beim ersten Kennenlernen zuerst auf die Zähne.² **60 %** finden, dass ein gesundes Lächeln zu einem höheren Selbstbewusstsein beiträgt.³

Zahnverfärbungen können verschiedene Ursachen haben: Extrinsische Verfärbungen betreffen den Zahnschmelz und werden vor allem durch abfärbende Genussmittel wie z. B. Kaffee, Tee, Nikotin, Traubensaft oder Rotwein hervorgerufen. Aber auch durch Antibiotika, Arzneimittel, Psychopharmaka und Appetitzügler können sich gelbliche Flecken oder Linien auf den Zähnen bilden.

Extrinsische Verfärbungen betreffen die innere Zahnschicht. Hier spielen stoffwechselbedingte, pharmakologische, traumatische oder angeborene Faktoren eine Rolle.

Eine professionelle Zahnaufhellung wirkt bei beiden Arten – und das grundsätzlich bei jedem Patienten. Philips Zoom gehört bereits seit Jahren zu den weltweit führenden Zahnaufhellungssystemen in Zahnarztpraxen und hat bereits über 4 Millionen Menschen auf der ganzen Welt zu einem strahlenden Lächeln verholfen.

Umfangreiches Portfolio

Philips Zoom bietet ein umfangreiches Portfolio an wissenschaftlich erprobten Produkten, sodass Sie Ihren Patienten eine individuell auf ihre Vorlieben und Bedürfnisse abgestimmte Behandlung anbieten können. Das Angebot umfasst Zahnaufhellungen in Ihrer Praxis und für zu Hause, mit Lichtaktivierung sowie für besonders sensible Zähne.

PHILIPS
Zoom!

So funktioniert die Philips Zoom Zahnaufhellung

Das effiziente und schonende Wirkprinzip

Zahnverfärbungen entstehen in erster Linie durch Lebens- und Genussmittel, weil sie reich an Chromophoren sind. Chromophoren sind komplex aufgebaute Moleküle, die sich in den Zähnen absetzen und die Zähne dunkel trüben. Zunächst wird das Zahnaufhellungsgel auf die Zähne aufgetragen. Der Wirkstoff dringt in die oberste Zahnschicht ein –

dort wo sich die Verfärbungen abgelagert haben. Das Wasserstoffperoxid im Gel bricht während der Wirkzeit die Kohlenstoffdoppelbindungen, die das Licht absorbieren, auf. So entstehen Einfachbindungen, die lichtdurchlässig sind. In der Folge erstrahlen die Zähne wieder in hellem Weiß.


Die Philips Zoom Zahnaufhellung in 6 Schritten



1. Die Farbträger lagern sich ein
Moleküle aus farbechten Lebens- und Genussmitteln setzen sich in den Zähnen ab und lassen sie dunkler erscheinen.

2. Das Zahnaufhellungsgel auftragen
Das Gel wird auf die Zähne aufgetragen, damit der Wirkstoff eindringen kann.

3. Die Farbträger brechen auf
Die Inhaltsstoffe des Gels brechen die Farbträger auf molekularer Ebene auf.

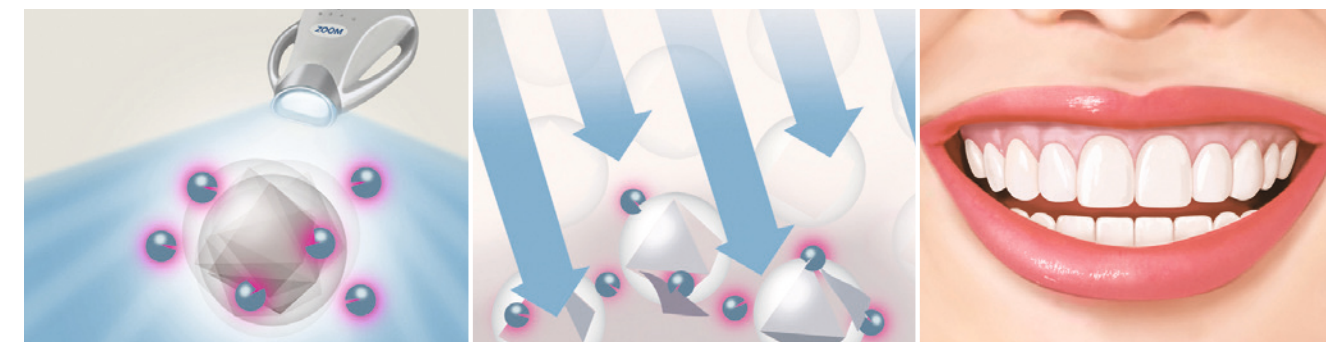

4. Das blaue Licht verstärkt
Die Lichtwellen versetzen die Farbträger in Schwingung, wodurch sie sich noch leichter aufbrechen lassen.

5. Die Zähne hellen auf
Die aufgebrochenen Farbträger verlieren ihre Farbe, in der Folge erstrahlen die Zähne in hellem Weiß.

6. Die Wirkung hält Jahre
Je nach Lebensgewohnheiten hält das Ergebnis einer solchen Zahnaufhellung 2–4 Jahre. Bei regelmäßiger professioneller Zahnreinigung hält der Effekt länger an.

¹ Quelle: Aktuelle Philips Studie.

² Quelle: Flemming, n=1004, 10/2015.

³ Quelle: NovioData, n=500, 1/2015.

Antworten auf die 4 wichtigsten Fragen

1

Schädigt eine Zahnaufhellung den Zahnschmelz?

Das Auftragen von Peroxiden greift weder Schmelz noch Dentin oder die Pulpa an – im Gegenteil: Studien konnten sogar nachweisen, dass Zahnaufhellung eine kariespräventive Wirkung haben kann. Plaque lagert sich schwerer an frisch aufgehellten Zähnen an.¹

2

Spürt der Patient etwas während der Zahnaufhellung?

Studien zufolge haben 99 % der Patienten keine oder nur geringe Sensibilitäten. Möglich sind – wenn überhaupt – nur temporäre Reizungen, die den Zahn jedoch nicht schädigen. Damit Zähne und Zahnfleisch nicht mehr gereizt sind, ist eine professionelle Zahnreinigung wichtig – möglichst eine Woche oder mindestens 2 bis 3 Tage vorher.

3

Hat blaues Licht wirklich einen Effekt?

Durch die Lichtwellen des blauen LED-Lichts werden die gelben Moleküle der Verfärbungen in Schwingung versetzt, wodurch sie instabiler werden und durch die Wirkstoffe des Gels leichter aufbrechen. So wird die Wirkung des aufhellenden Gels intensiviert, und es kann im Vergleich zu Zahnaufhellung ohne Lichtaktivierung ein niedriger dosiertes Gel (25 % Wasserstoffperoxid) verwendet werden, um ein hervorragendes Ergebnis zu erzielen.

4

Wie lange hält der Effekt an?

Je nach Lebensgewohnheiten hält das Ergebnis einer solchen Zahnaufhellung 2 bis 4 Jahre. Eine regelmäßige professionelle Zahnreinigung wirkt sich positiv auf das Ergebnis aus.

Kosmetikverordnung (EU-Richtlinie 2011/84/EU)

Kosmetische und medizinische Zahnaufhellung

Aus Gründen des Patientenschutzes wird die Rolle und Funktion der Zahnarztpraxen bei der Durchführung von Zahnaufhellungen gestärkt. Alle Produkte die > 0,1% bis 6 % Wasserstoffperoxid (H_2O_2) enthalten, oder daraus freisetzen, dürfen nur noch unter direkter zahnärztlicher Aufsicht angewendet werden. Nach der ersten Anwendung kann das Mittel dann dem Verbraucher überlassen werden. Die Abgabe an Minderjährige ist verboten. Lediglich Produkte die weniger als 0,1% H_2O_2 enthalten, sind auch weiterhin frei verkäuflich.

Produkte, in denen mehr als 6 % H_2O_2 enthalten ist, können eine medizinische Zweckbestimmung (Heilbehandlung gemäß Zahnheilkundengesetz) erfüllen und können somit weiterhin als Medizinprodukt in den Verkehr gebracht werden. In diesem Fall sind alle Anwendungszyklen in der Praxis durchzuführen. Somit sind Verfärbungen, die durch Traumata, Erkrankung oder medizinische Behandlungen (Fluorose, Gelbsucht, Tetracycline, Kalzifizierung) entstanden sind, weiterhin behandelbar.

Die Bundeszahnärztekammer zum Thema Sicherheit²

Es ist keine Schädigung des Zahnfleisches zu erwarten, solange alle Anwendungsvorschriften eingehalten werden, die Behandlung also in der Praxis durchgeführt und der Zahnfleischrand durch Gummimanschetten oder Isolationsmittel abgedeckt wird. Lediglich wird von Patienten nach der Aufhellungstherapie unter

Umständen eine verstärkte Empfindlichkeit der Zähne beobachtet, die aber durch Fluoridierungsmaßnahmen behoben werden kann. Nach heutigem wissenschaftlichen Stand ergibt sich keine negative Beeinträchtigung der Zahnhartsubstanz, sofern die Anwendungsvorschriften beachtet werden.

¹Quelle: Kina JF, Huck C, Riehl H, Martinez TC, Sacono NT, Ribeiro APD, Costa CAS. Response of human pulps after professionally applied vital tooth bleaching. International Endodontic Journal 43, 572–580, 2010; Haywood VB. Bleaching and caries control in elderly. International Dentistry SA Vol. 9 No. 6, 18.21, 2007.

²Quelle: Dr. Dietmar Oesterreich, Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer (2014); [www.bzaek.de/nc/patienten/patienteninformationen/prophylaxe-zahnerhaltung/zahnaufhellung-bleaching.html?sword_list\[0\]=bleaching](http://www.bzaek.de/nc/patienten/patienteninformationen/prophylaxe-zahnerhaltung/zahnaufhellung-bleaching.html?sword_list[0]=bleaching).



Zahnaufhellung in der Praxis

Überzeugende Ergebnisse mit Lichtaktivierung

Lichtaktivierte Zahnaufhellung mit Philips Zoom WhiteSpeed

In klinischen Studien konnte die Effektivität und Nachhaltigkeit der lichtaktivierten Aufhellungsmethode von Philips Zoom nachgewiesen werden: Schon durch nur eine Behandlung in der Praxis können die Zähne um bis zu 8 Helligkeitsstufen aufgehellte werden. Und auch nach 30 Tagen sind sie um 42% heller als nach einer Zahnaufhellung ohne Lampe.¹ Die Anwendung für eine kosmetische oder medizinische Aufhellung erfolgt schonend mit einem geeigneten Zahnaufhellungsgel.

Hervorragende Ergebnisse innerhalb einer Sitzung – auch bei starken Verfärbungen

Bei der lichtaktivierten Philips Zoom Zahnaufhellung in der Praxis wird die Wirkung des Aufhellungsgels durch eine speziell hierfür entwickelte Lampe mit blauem LED-Licht verstärkt.

Dank der Philips Zoom WhiteSpeed LED-Lampe werden Verfärbungen trotz kürzerer Anwendungszeit deutlich intensiver entfernt als bei einer vergleichbaren Behandlung ohne Licht.

Vorteile von Philips Zoom

- Es entsteht keine Säure, die den Zahnschmelz angreifen könnte.
- Der komplette Zahn wird aufgehellte, von der Wurzelspitze bis zur Schneidekante.
- Die Pulpa wird nicht so stark gereizt und eine höhere Kundenzufriedenheit erreicht.
- Einsatz für die Durchführung medizinischer und kosmetischer Zahnaufhellungen mit geeigneten Aufhellungsgelen.

Kostenlose Demonstration in Ihrer Praxis

Überzeugen Sie sich selbst von der Wirksamkeit von Philips Zoom. Vereinbaren Sie jetzt Ihren Termin und lassen Sie sich die Philips Zoom Technologie live vorführen.

 In Deutschland und Österreich:
Tel.: **+49(0)40 3497 130 10** oder
per E-Mail: **sonicare.deutschland@philips.com**

 In der Schweiz:
Tel: **0800 422 944** oder
per E-Mail: **sonicare.ch@philips.com**

¹Quelle: Sabiha M. Bunek, DDS; John M. Powers, PhD; John W. Farah, DDS, PhD; Lori K. Brown, DDS; Santine E. Anderson, DDS; William T. Stevenson, DDS; Robert J. Stevenson, DDS. Effect of Philips Zoom Advanced Power Lamp on Whitening. Dental Advisor Research Report (Dental Consultants, Inc.), 2008.

Schnelle, überzeugende Ergebnisse –

mit der Philips Zoom White Speed Lampe und dem Chairside Anwendungskit

Vorzüge der Philips Zoom White Speed Lampe



- 3 Einstellungen, die auch während der Sitzung geändert werden können:**
 - Hoch: 190 mW/cm²
 - Mittel: 120 mW/cm²
 - Niedrig: 50 mW/cm²
- Lange Lebensdauer:**
Bis zu 50.000 Betriebsstunden, dank Philips Blue LED-Technologie bei reduziertem Stromverbrauch¹
- Hervorragende Ergonomie:**
Schlankes Design, neue Griffe und moderne Gegen-gewicht-Handhabung sowie vereinfachte Lagerung




Vorher: A3



Nachher: B1

¹ um 40% im Vgl. zur Philips Zoom Vorgängerversion
Quelle: Sabiha M. Bunek, DDS; John M. Powers, PhD; John W. Farah, DDS, PhD; Lori K. Brown, DDS; Santine, E. Anderson, DDS; William T. Stevenson, DDS; Robert J. Stevenson, DDS. Effect of Philips Zoom Advanced Power, Lamp on Whitening. Dental Advisor Research Report (Dental Consultants, Inc.), 2008.

Philips Zoom Chairside Anwendungs kits

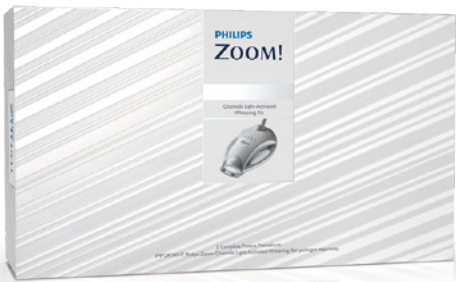

Rundumpaket für 2 Patienten
Das Philips Zoom Anwendungs kit enthält **alles**, um zwei lichtaktivierte Zahnaufhellungen in der Praxis durchzuführen.

Einzigartig –
Anwendungs kits sind als 6% H₂O₂ und 25% H₂O₂ erhältlich

Chairside Anwendungs kits im Überblick

	6% H ₂ O ₂ Chairside Anwendungs kit	25% H ₂ O ₂ Chairside Anwendungs kit
Konzentration	Niedrige Konzentration	Mittlere Konzentration
Aufhellungsgrad	Bis zu 7 Nuancen	Bis zu 8 Nuancen
Besonderheiten	Geringere Sensibilitäten	Auch für sehr starke Zahnverfärbungen ideal
Individuelles Nachhellen möglich	Dank inkludierter touch-up Möglichkeit kann mit einer Schiene individuell zu Hause nachgehellt werden	Es kann bei Wunsch mit Philips Zoom TakeHome Produkten individuell zu Hause nachgehellt werden
Anwendungsdauer des Gels	4 x 15 Minuten	3 x 15 Minuten, optional 4 x 15 Minuten
Inhalt	H ₂ O ₂ , 4,6 g (0,16 oz) 4 Blätter 0,040 Ethylvinylacetat, 2 Lichtleiter, 2 Iso-Prep-Retraktor, 4 Gesichtsschutztücher, 12 quadratische Gaze-Läppchen, 2 Liquidam Dentaldam, 2,9 g (0,01 oz.), Metall- und Kunststoffspitzen, 4 Watterollen, 2 chirurgische Saugspitzen, 2 Bürsten, 4 Booster, 4 Bleaching Spritzen, Inhalt: 2x DayWhite oder 2x NiteWhite	H ₂ O ₂ , 4,6 g (0,16 oz) 2 Lichtleiter, 2 Iso-Prep-Retraktor, 4 Gesichtsschutztücher, 12 quadratische Gaze-Läppchen, 2 Liquidam Dentaldam, 2,9 g (0,01 oz.), Metall- und Kunststoffspitzen, 4 Watterollen, 2 chirurgische Saugspitzen, 2 Bürsten, 2 Relief ACP-Gel-Spritzen 2,4 ml (0,08 fl. Oz.)




Zahnaufhellung für zuhause

Leicht anzuwendende Produkte für die Zahnaufhellung zu Hause

Für Patienten, die eine Aufhellung zu Hause bevorzugen, hat Philips Zoom mit DayWhite ACP und NiteWhite ACP zwei schonende und unkomplizierte Lösungen entwickelt. Nach der Erstanwendung in der Praxis können Ihre Patienten die Anwendung mithilfe einer individuell angefertigten Schiene tagsüber oder nachts fortführen – ganz nach ihren Bedürfnissen.

Größerer Komfort und bessere Ergebnisse
Die Philips Zoom Zahnaufhellungsprodukte für zu Hause enthalten eine besonders schonende Wirkstoffformel mit 3-fach-Wirkung. Neben zahnstärkendem Fluorid und zahnreparierendem ACP enthalten sie eine hohe Konzentration an Kaliumnitrat. In Kombination mit ACP reduziert es die Empfindlichkeiten nach Eingriffen und sorgt für eine längere Haltbarkeit des Aufhellungsergebnisses. In Studien konnte die Wirkung von ACP überzeugend dargestellt werden¹.

¹Quelle: A 180-Day Clinical Investigation of the Tooth Whitening Efficacy of a Bleaching Gel with Added Amorphous Calcium Phosphate, in vivo study, Giniger M., Spaid M.I., MacDonald J., Felix H., J Clin Dent 1611-16, 2005, Martin Giniger & Company, New York, NY, USA, 2Discus Dental, Culver City, CA, USA).

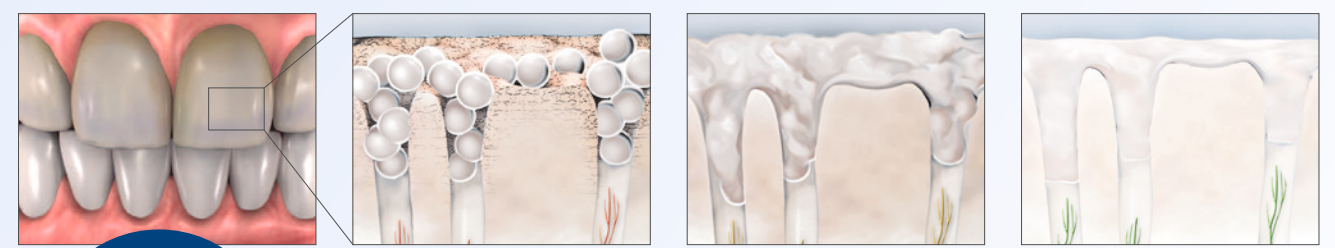

Mit
**3-fach-
Wirkung**
durch
ACP

Schritt 1
Die ACP-Kristalle verbinden sich während der Aufhellung mit der Zahnoberfläche.

Schritt 2
Die ACP-Kristalle verschließen die offenen Dentinkanälchen; das reduziert die Sensibilität.

Schritt 3
ACP baut den Schmelz wieder auf und füllt die Oberflächenporen.



Anwendung tagsüber mit Philips Zoom DayWhite
• 2x täglich für jeweils 15 bis 30 Minuten
• Optimale Ergebnisse nach ca. 2 Wochen



Anwendung nachts mit Philips Zoom NiteWhite
• Tägliche Anwendung über Nacht für je 4–6 Stunden
• Optimale Ergebnisse nach ca. 1–2 Wochen



Relief® ACP Oral Care Gel

Effektiver Schutz bei empfindlichen Zähnen


Für Patienten mit sensiblen Zähnen bietet Relief® ACP Oral Care Gel eine einzigartige Lösung, um die Empfindlichkeit zuverlässig zu vermindern. Das patentierte ACP (amorphes Calciumphosphat) repariert beispielsweise Schäden in der Zahnoberfläche. So sind die Zahnschmerz-Rezeptoren sicher vor Hitze, Kälte, Säuren und Berührungen geschützt. Weiterer Vorteil: Das Relief® ACP Gel hilft dabei, Karies vorzubeugen. Seine Wirksamkeit liegt in der Zusammensetzung:

Kaliumnitrat:
Für eine schnelle Unempfindlichkeit der Zähne.


ACP:
Für eine schnelle Reparatur des Zahnschmelzes.

Natriumfluorid:
Für eine Förderung des Zahnschmelzaufbaus und bei regelmäßiger Anwendung zum Schutz vor Karies.

Erwiesene Wirksamkeit
ACP ist einzigartig innerhalb der Zahnschmelzreparatur. Es wirkt besonders schnell, verbessert die Schmelzoberfläche und somit den Glanz der Zähne.^{1,2}

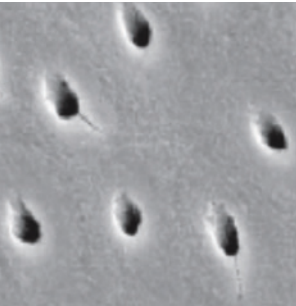

Unbehandelter Zahn vor der Anwendung

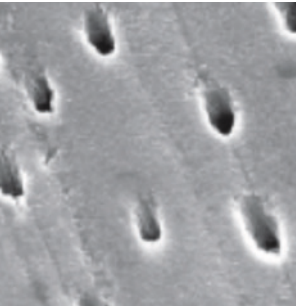

Mit Fluorid und Kaliumnitrat behandelter Zahn



Mit Relief® ACP behandelter Zahn

¹Quelle: Tung, M.S., Eichmiller, F.C. Amorphous Calcium Phosphate for tooth mineralization. Compend Contin Educ Dent, Vol. 25, No. 9 Suppl 1, Sep 2004, pp 9-13. Journal Code 9600713, Journal Subset MEDJSD, ISSN 1548-8578.

²Quelle: Schemehorn, B.R., Orban, J.C., Wood, G.D., Fischer, G.M. Remineralization by Fluoride Enhanced with Calcium and Phosphate Ingredients. The Journal of Clinical Dentistry, Vol. X, No. 1.



Zahnaufhellung auch bei empfindlichen Zähnen

Für Patienten mit sensiblen Zähnen
Bei Patienten mit sensiblen Zähnen empfiehlt sich die Anwendung des Relief® ACP Gels. Dieses Gel vermindert die Empfindlichkeiten um 30%.¹ Empfindliche Patienten können dieses Gel auch schon einige Tage vor der

Behandlung benutzen, um ihre Zähne auf die Zahnaufhellung vorzubereiten. Die Wirkstoffkombination aus ACP und Fluorid verschließt die offenen Dentinkälchen schneller als Fluorid allein.

¹Quelle: Angaben aus dem Journal of the American Dental Association: Clinical Performance of Professionally Dispensed Bleaching Gel with Added Amorphous Calcium Phosphate, JADA Bd. 136, März 2005.

Alle Philips Zoom Produkte auf einen Blick

Zahnaufhellung in der Praxis



Produkt	Philips Zoom WhiteSpeed mit Marketing-Material	Philips Zoom Chairside Anwendungskit 25% H ₂ O ₂ ohne Auffrischung	Philips Zoom Chairside Anwendungskit 6% H ₂ O ₂ mit Auffrischung
Artikel-Nummer	ZME3000	Duo Kit für 2 Patienten ZME2667	Duo Kit für 2 Patienten Mit NiteWhite ACP 16% CP: ZME2691 Mit DayWhite: ACP 6% H ₂ O ₂ ZME2692
Beschreibung	• Mit Powerkabel, IsoPrep klein, Flyer, Poster und Tresenaufsteller • Bis zu 8 Helligkeitsstufen hellere Zähne mit nur einem Praxisbesuch	Zahnaufhellungsgele 25% H₂O₂, 4,6 g (0,16 oz) • 2 Lichtleiter • 2 Iso-Prep-Retraktor • 4 Gesichtsschutztücher • 12 quadratische Gaze-Läppchen • 2 Liquidam Dentaldam, 2,9 g (0,01 oz.), Metall- und Kunststoffspitzen • 4 Watterollen • 2 chirurgische Saugspitzen • 2 Bürsten • 2 Relief ACP-Gel-Spritzen, 2,4 ml (0,08 fl. Oz.)	Zahnaufhellungsgele 6% H₂O₂, 4,6 g (0,16 oz) • 4 Blätter 0,040 Ethylenvinylacetat • 2 Lichtleiter • 2 Iso-Prep-Retraktor • 4 Gesichtsschutztücher • 12 quadratische Gaze-Läppchen • 2 Liquidam Dentaldam, 2,9 g (0,01 oz.), Metall- und Kunststoffspitzen • 4 Watterollen • 2 chirurgische Saugspitzen • 2 Bürsten • 4 Booster • 4 Bleaching-Spritzen Inhalt: 2 x DayWhite oder 2x NiteWhite

Zahnaufhellung zu Hause



Produkt	Philips Zoom DayWhite – Mini Kit DayWhite 6% Wasserstoffperoxid (H ₂ O ₂)	Philips Zoom NiteWhite – Mini Kit NiteWhite 16% Carbamidperoxid (CP)	Philips Zoom DayWhite – Standard Kit DayWhite 6% Wasserstoffperoxid (H ₂ O ₂)	Philips Zoom NiteWhite – Standard Kit NiteWhite 16% Carbamidperoxid (CP)
Artikel-Nummer	ZDWEF1010	ZNWEF1006	ZDWEF1011	ZNWEF1008
Beschreibung	• 3 Spritzen (à 2,6 g) für ca. 9 Anwendungen • 3 Mischaufsätze, Gebrauchsanleitung	• 3 Spritzen (à 2,6 g) für ca. 9 Anwendungen • 3 Mischaufsätze, Gebrauchsanleitung	• 6 Spritzen (à 2,6 g) für ca. 18 Anwendungen • 6 Mischaufsätze, Gebrauchsanleitung, Farbskala • 2 EVA PE Tiefziehfolien, Aufbewahrungsbox	• 6 Spritzen (à 2,6 g) für ca. 18 Anwendungen • 6 Mischaufsätze, Gebrauchsanleitung, Farbskala • 2 EVA PE Tiefziehfolien, Aufbewahrungsbox

Relief® ACP Gele



Produkt	Relief® ACP Nachfüllpackung	Relief® ACP Starterkit
Artikel-Nummer	PVE1602	PVE1609
Beschreibung	• 4 Spritzen für 8 Anwendungen OK und UK • 4 Mischaufsätze, Gebrauchsanleitung	• 6 Spritzen für 12 Anwendungen OK und UK • 6 Mischaufsätze, Gebrauchsanleitung, Farbskala • 2 EVA PE Tiefziehfolien, Aufbewahrungsbox



Erklären Sie Ihren Patienten die **richtige Putztechnik**

So putzen Ihre Patienten richtig



Auftragen der Zahnpasta

Tragen Sie nur kleine Mengen einer gering-abrasiven Zahnpasta, die ihre Zähne und das Zahnfleisch schonend reinigt, auf die Philips Sonicare Schallzahnbürste auf. Verwenden Sie nicht-schäumende Zahnpasten ohne SLS.



Ausrichten der Zahnbürste

Legen Sie die Zahnbürste so an die Zähne an, dass der Bürstenkopf sowohl die Zähne als auch das Zahnfleisch berührt. Die Bürstenfaser richten Sie unter dem Zahnfleisch im 45° Winkel aus. Übermäßigen Druck auf die Zahnbürste vermeiden.



Von einem Zahn zum anderen

Bewegen Sie die Zahnbürste langsam von einem Zahn zum anderen. Im nächsten Schritt wischen Sie die Zähne sanft „vom Zahnfleisch zum Zahn“. Lassen Sie die Zahnbürste jede Zahnfläche mindestens 2 Sekunden reinigen.



Innenflächen der Zähne

Mit der gleichen Bewegung reinigen Sie auch die inneren Zahnflächen im Ober- sowie Unterkiefer.



Kauflächen

Mit langsamem Bewegen der Zahnbürste auch die Kauflächen reinigen.



Hintere Zähne

Stellen Sie sicher, dass Sie auch die letzten Backenzähne und ihre hinteren Flächen gereinigt haben.

Tipp:

Um optimale Reinigungsergebnisse zu erzielen, verlängern Sie die Reinigungszeit, d. h. 2 Minuten entlang der Zahnfleischlinie reinigen + 1 Minute die Zahnflächen und die Kauflächen reinigen.

Ihre Vorteile auf einen Blick So profitieren Sie mit Philips in Ihrer Praxis

- ✓ Umfangreiche persönliche Beratung durch unsere geschulten Philips Mitarbeiter
- ✓ Innovative und patentierte Technologie mit speziellen Test-Angeboten für Praxis-Mitarbeiter
- ✓ Sichere und geprüfte Produktqualität
- ✓ Zufriedene Patienten durch zuverlässige Produkte
- ✓ Kein Risiko durch Geld-zurück-Garantie
- ✓ Exzellenter Service
- ✓ Starke Marketing-Unterstützung durch Beratung und Materialien für Ihre Praxis. Bestellen Sie einfach über unsere Hotline oder direkt bei Ihrem Philips Ansprechpartner die gewünschten Broschüren.



Abwicklung im Garantiefall

Philips hat einen hohen Anspruch an Qualitätsstandards – dennoch kann es vorkommen, dass es einen Grund zur Beanstandung gibt. Unser Ziel ist es, für eine zügige und effiziente Abwicklung des Garantiefalls zu sorgen. In nur 3 einfachen Schritten helfen wir dem Patienten schnell und unkompliziert.

Wichtig: Nichtgefallen bzw. „Geld-zurück-Garantie“ (siehe unten), normaler Verschleiß und Eigenverschulden werden nicht durch die Garantie abgedeckt!

1. Der Patient sollte beim Anruf folgende Informationen bereithalten: den Kaufbeleg samt Kaufdatum (Garantienachweis) und das Produkt (Produktbezeichnung).
2. Der Patient kann sich direkt bei Philips über unseren telefonischen Kundenservice melden:



Aus Deutschland: 040 80 80 10 9 80
(Von Mo. bis Fr. von 8 bis 20 Uhr und Sa. von 9 bis 18 Uhr zum Festnetztarif des Anbieters.)
Aus Österreich: 01 546 325 103
(Von Mo. bis Fr. von 8 bis 20 Uhr und Sa. von 9 bis 18 Uhr zum Festnetztarif des Anbieters.)
Aus der Schweiz: 044 21 26 21 4
(Von Mo. bis Fr. von 8 bis 18 Uhr zum Festnetztarif des Anbieters.)

3. Nachdem das Gerät eingesendet wurde und wir überprüft haben, ob es sich um einen Qualitätsmangel handelt, der durch die zweijährige Garantiefrist gedeckt wird, schicken wir dem Kunden schnellstens ein Ersatzhandstück bzw. eine Ersatzladestation zu.

Bei Anfragen Ihrer Patienten: Zur Abwicklung im Garantie-/Geld-zurück-Garantie-Fall oder für alle weiteren Patientenfragen verweisen Sie gern an die oben genannten Telefonnummern.

Ablauf Geld-zurück-Garantie



Philips Geld-zurück-Garantie (GzG) für unsere Philips Sonicare Professional Produkte ist ein Service für unsere Partner-Praxen, die verkaufen.

Nur für Mitarbeiterangebote oder Geräte, die in der Zahnarztpraxis an Patienten verkauft wurden, gilt: Wenn Sie oder Ihre Patienten innerhalb von 30 Tagen ab dem Kaufdatum aus irgendeinem Grund mit Ihrem Philips Gerät nicht zufrieden sind, wird Ihnen oder Ihren Patienten der Kaufpreis vorbehaltlos zurückerstattet.

Philips Zoom ist von der GzG ausgeschlossen.

Um eine schnelle und reibungslose Abwicklung zu garantieren, ist es zwingend erforderlich, folgende Schritte zu beachten:

- **Wichtig:** Der GzG-Service läuft nicht über Ihren Verkaufspartner, sondern kann ausschließlich online unter www.philips.com/geldzurueck angemeldet werden. Um weitere Zahlungsaufforderungen, Mahnungen usw. zu vermeiden, ist es notwendig, dass die gesamte Rechnung Ihres Verkaufspartners fristgerecht beglichen wird.
- **GzG gilt nur für Geräte und nicht für Zubehör.** Zusätzlich bestelltes Zubehör wie z. B. Ersatzbürstenköpfe oder Ersatzdüsen sind von der GzG ausgeschlossen und werden bei der Rücksendung nicht erstattet!

Nur vollständige Rücksendungen inkl. Zubehör und Originalverpackung mit Kaufbeleg sowie Angabe von Adresse und Bankverbindung können bearbeitet werden.

Weitere Informationen sowie Garantiebedingungen unter: www.philips.com/geldzurueck

Wir sind für Sie da!

Sie haben weitere Fragen? Sie erreichen das Team von Philips Sonicare Professional **Montag–Donnerstag 9:00–16:00 Uhr | Freitag 9:00–15:00 Uhr** unter folgender Telefonnummer oder E-Mail-Adresse:



+49(0)40 3497 130 10



sonicare.deutschland@philips.com



www.philips.de/zahnmedizin
www.dentalshop.philips.de



0800 422 944



sonicare.ch@philips.com



www.philips.de/zahnmedizin
www.dentalshop.philips.ch

