

ENTDECKEN SIE... **mis[®]**



...UND DIE VORTEILE
DES NEUEN
V3 IMPLANTATS!



HOHE PRODUKTQUALITÄT



GLOBAL
ZUVERLÄSSIG
PARTNERSCHAFTLICH

Die Strategie von MIS ist einfach: „Kompromisslose Qualität, fairer Preis“. MIS ist heute einer der weltweit größten Hersteller von Zahnimplantaten.

International

MIS Implantate werden heute in 65 Ländern erfolgreich inseriert.

Bewiesener Erfolg

MIS gehört inzwischen zu den fünf größten Implantatmarken weltweit.

Umfassende wissenschaftliche Evidenz

MIS Produkte sind seit Jahren bestens wissenschaftlich dokumentiert. Aktuell laufen über 90 internationale Studien.

Breites Produktprogramm

MIS bietet Zuverlässigkeit und Innovation für Implantate, Prothetik, Regeneration, CAD/CAM und Guided Surgery.

Kompromisslose Qualität, fairer Preis

Millionenfach bewährt, wirtschaftlich, klinisch sicher: Zu jedem V3, C1 und SEVEN Implantat erhalten Sie den dazu perfekt passenden Finalbohrer kostenlos dazu.





mis

HOHE PRODUKTQUALITÄT



HOHE
PRODUKTQUALITÄT

Hohe Produktqualität

MIS hat eine der größten Produktionen für Implantate weltweit.

Wir erfüllen die Normen

ISO 13485:2003

Quality Management System
for Medical Devices

ISO 9001:2008

Quality Management System

CE Directive

for Medical Devices 93/42/EEC

und haben zusätzlich eine Reihe von proprietären Qualitätsicherungs- und Prozesskontrollschritten. Unsere Produkte sind CE- und FDA-zertifiziert.


Service

Ausgezeichneter Service mit Ihrem persönlichen Ansprechpartner für alle Fragen:

Ihr MIS Außendienstmitarbeiter ist Ihr kompetenter Ansprechpartner zu allen unseren Produkten: Implantate, Prothetik, Regeneration, geführte Chirurgie und CAD/CAM.



* für weitere Informationen besuchen Sie: www.mis-implants.de

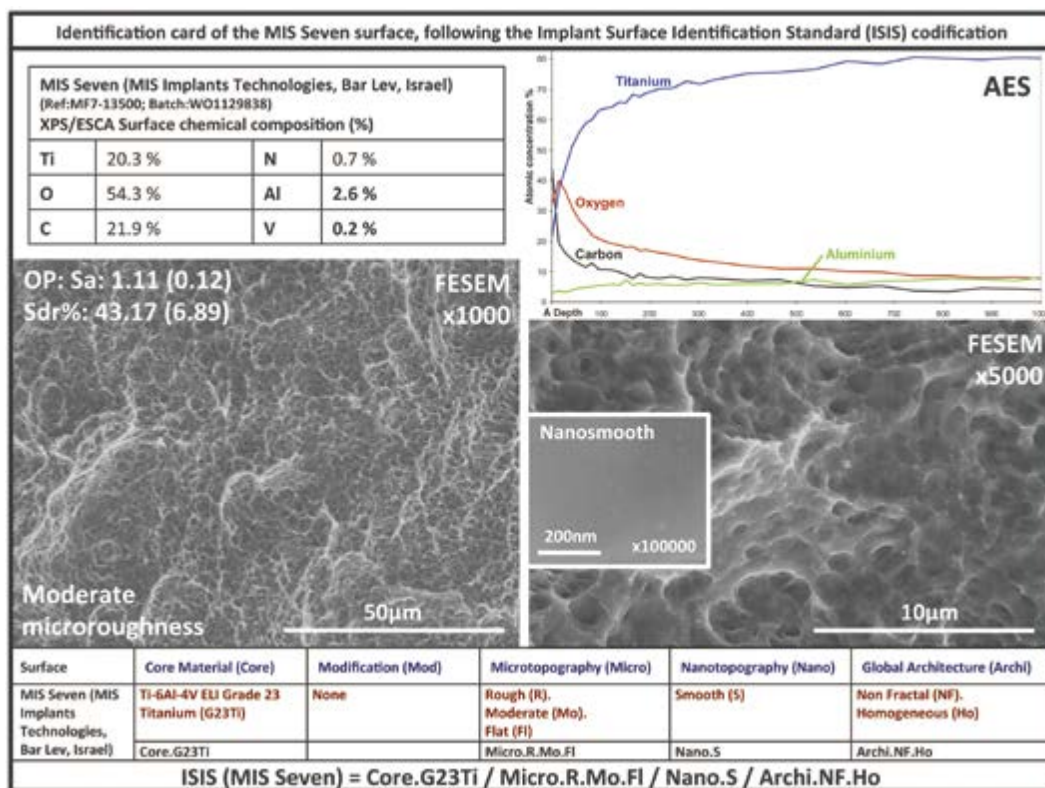
IMPLANTAT
OBERFLÄCHE

EDI Journal - 1/2015:

"Surface analysis of sterile-packaged implants", 65 different implant systems from 37 manufacturers and ten countries examined by (SEM). MIS implants, C1 and SEVEN, stood out positively without any findings of isolated spots with residue on the implants surface.

The POSEIDO Journal - 2014 (Volume 2):

"Identification card and codification of the chemical and morphological characteristics of 62 dental implant surfaces". Identification card of the MIS SEVEN implant, titanium grade 5 ELI, grade 23: "No pollution or chemical modification was detected."

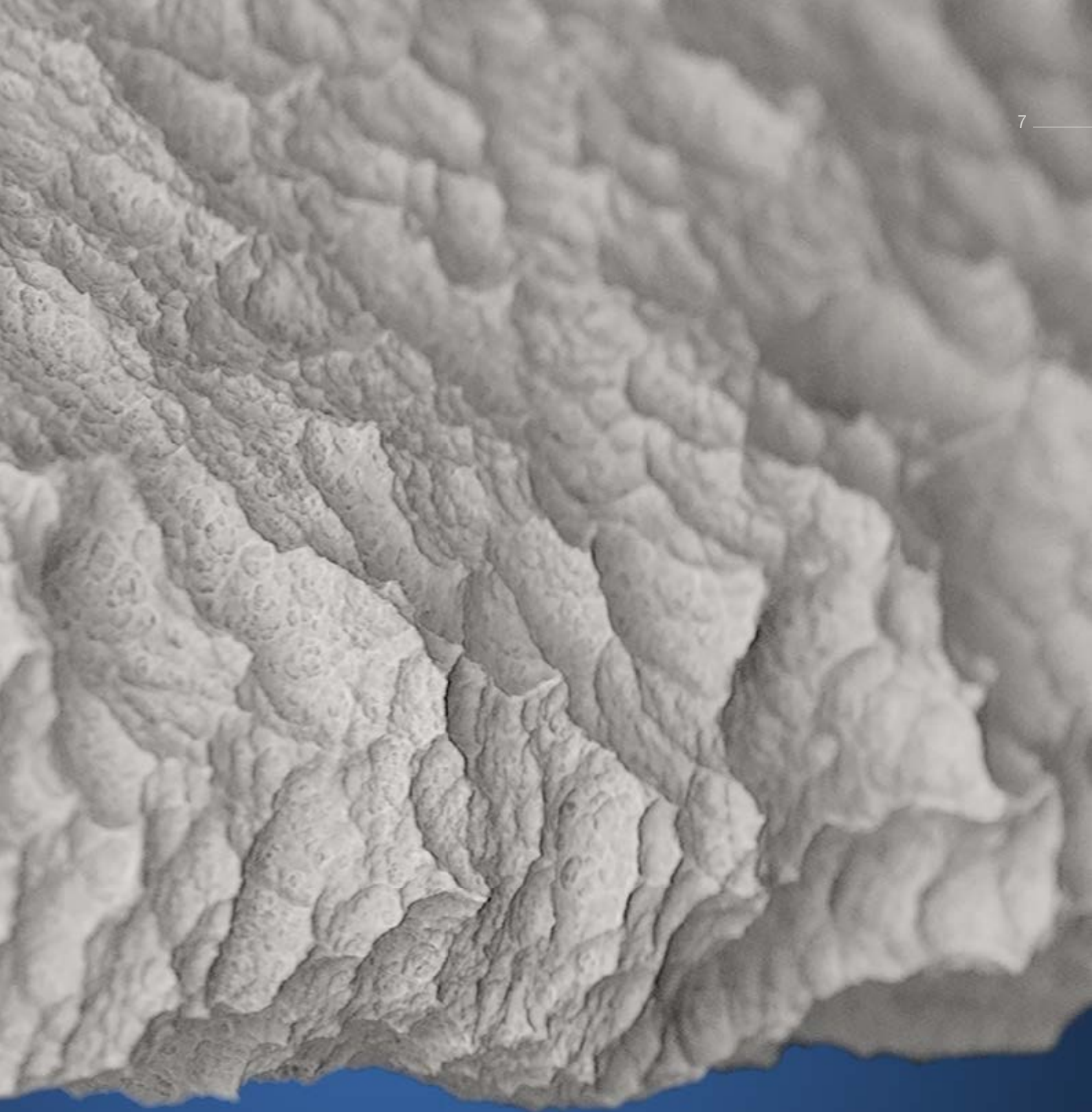

Die MIS mikro-makro rauhe Oberfläche basiert auf dem Industriestandard der Technologie für Sandstrahlung und Ätzung von Oberflächen.

Mit dem Einsatz unserer fortschrittlichen Produktionstechnologie haben wir das Verfahren perfektioniert. Die MIS-Oberfläche ist frei von chemischen Rückständen oder Verschmut-

zungen* und kann damit als hochrein bezeichnet werden. Damit grenzen wir uns – selbst im Vergleich zu etablierten Premium-Hersteller – positiv ab.*

*Quelle: Poseido 2014, ISIS Identification Cards of 62 Implant surfaces. Ehrenfest, del Corso et al.



MIS dentale Implantate

MIS bietet vielfältige und zuverlässige prothetische Lösungen für alle Einsatzgebiete von der einfachen und kostengünstigen bis hin zur komplexen Multi-Unit-Versorgung.




Vor der Versorgung

Gingivaformer,
Abdruckpfosten,
Laborimplantat



Temporär

Temporäre Zylinder,
PEEK Abutments

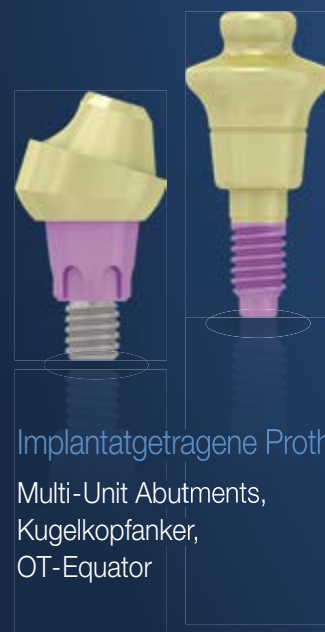

Implantatgetragene Prothetik

Multi-Unit Abutments,
Kugelpfanker,
OT-Equator

IMPLANTAT- PROTHETIK



Definitive Versorgung
Ästhetik Aufbau (Zirkon)
Abutments aus Titan
Komplettes Prothetik Kit (CPK)



Die MIS 4BONE™ Produkte bestehen aus hochwertigen und innovativen regenerativen Lösungen für effiziente, sichere und zuverlässige Augmentationen.

Gut dokumentierte und hohe Biokompatibilität, osseokonduktiv und resorbierbar. • Verfügbar in vollsynthetisch, bovin oder porcine. • Leichte Handhabung und ausgezeichnete Standfestigkeit, auch bei Blutung. • Unterschiedliche Produkte für kleine oder große Defekte. • Strenge Qualitätskontrolle für höchste Ergebnissicherheit.



4BONE™ XBM

Anorganische Knochenmatrix
(bovin)



4BONE™ BCH

Synthetisches bioaktives
Knochenersatzmaterial



BONDBONE®

Innovatives synthetisches
Knochenaufbaumaterial

LÖSUNGEN FÜR DIE REGENERATION



4BONE™ RCB

Flexible Kollagenmembran
(bovin)



4BONE™ RSB

Kollagenmembran (bovin)
Ideal für die GBR Technik



4BONE™ RCM

Kollagenmembran (porcin)
Ideal für PA Chirurgie



4BONE™ PLUG

Resorbierbare
Kollagenwundeinlage



4BONE™ TAPE

Resorbierbare
Kollagenwundabdeckung



In unserem MCENTER in Berlin steht Ihnen ein erfahrenes und spezialisiertes Expertenteam zur Seite. Sie nehmen Ihnen zeitintensive Arbeitsschritte ab und helfen so, die Produktivität Ihrer Praxis zu steigern.

Bei MGUIDE platzieren wir die Implantate nach Ihren Vorgaben auf dem Computer, stimmen die Planung mit Ihnen ab und erstellen dann die perfekt passende Bohrschablone.

Mit MLAB erstellen wir Ihnen temporäre Lösungen und die perfekt zu den MIS Implantaten passenden individuellen Abutments.



DIGITALE ZAHNMEDIZIN



MIS® | MGUIDE

Innovative Bohrschablone

Stabil, exakt passend und sicher – mit freiem Zugang für Instrumente und gutem Ablauf von Kühlflüssigkeit.



MIS® | MLAB

Lösungen für temporäre und individuelle Abutments.



IMPLANTATE



Alle MIS Zahnimplantate werden nach höchsten Fertigungsstandards in unserer eigenen Fabrik gefertigt.

Alle Produkte überzeugen durch viele innovative Vorteile, die von Anwendern in der ganzen Welt geschätzt werden.



M4

HEXAGONALE
INNENVERBINDUNG

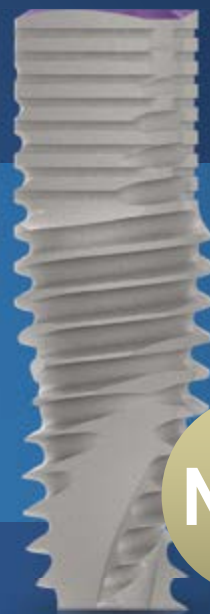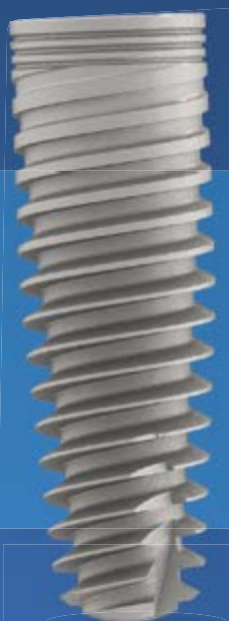

NEU!

MEHR KRESTALER KNOCHEN



SEVEN

HEXAGONALE
INNENVERBINDUNG

C1

12°
KONUSVERBINDUNG

V3

12°
KONUSVERBINDUNG

Zu jedem MIS SEVEN, C1 und V3 Implantat liefern wir den passenden Finalbohrer dazu – kostenfrei.



Hexagonale Innenverbindung
Für vielfältige Möglichkeiten in der Restauration.

Selbst stabilisierendes, flaches Doppelgewinde
Für optimalen BIC (Bone to Implant Contact).

Flachschneidender Apex
Ermöglicht finale Korrekturen.

Drei Spiralkanäle
Für effizientes Autografting.

MIS Implantatoberfläche
Die Oberflächen von unseren Implantaten werden nach einem von MIS weiter entwickelten Verfahren sandgestrahlt und säuregeätzt. Dadurch erreichen wir eine 100 % reine Oberfläche die eine sichere Osseointegration gewährleistet (lt. Poseido Studie 2014).

MILLIONENFACH BEWÄHRT, SPEZIELL FÜR HARTEN KNOCHEN

Flachschneidender
Apex




Drei
Spiralkanäle



Doppelgewinde



Hexagonale
Innenverbindung

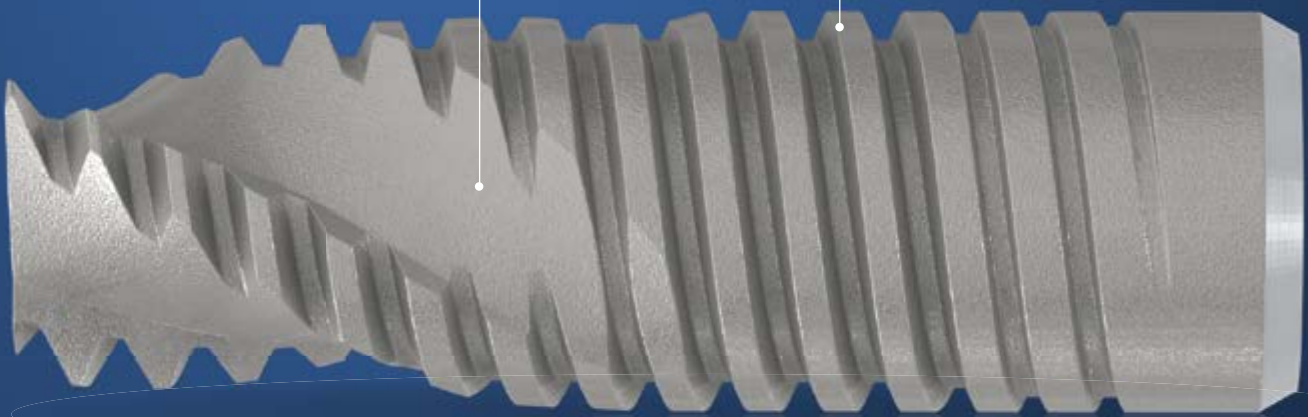



Hexagonale Innenverbindung

Für vielfältige Möglichkeiten in der Restauration.

Mikro-Ringe

Höherer BIC (Bone to Implant Contact) für ausgezeichnete Primärstabilität und Bakterienabwehr zur Reduktion des Periimplantitis-Risikos.

DTD (Dual-Thread Design / Doppelgewinde)

Höherer BIC, bequemes und effizientes Eindrehen.

Drei Spiralkanäle

Für effizientes Autografting.

Selbstschneidender abgerundeter Apex

Sicheres, effizientes Arbeiten.

Komprimierendes Gewinde

Durch zunehmende Gewindestärke wird der Knochen während der Implantatinserktion komprimiert und eine hohe Primärstabilität bei allen Knochenqualitäten gewährleistet.

MIS Implantatoberfläche

Die Oberflächen von unseren Implantaten werden nach einem von MIS weiter entwickelten Verfahren sandgestrahlt und säuregeätzt. Dadurch erreichen wir eine 100 % reine Oberfläche die eine sichere Osseointegration gewährleistet (lt. Poseido Studie 2014).




UNIVERSELLES IMPLANTAT IN KONISCHER FORM


Farbkodierter
Innenhex



Mikro-Ringe

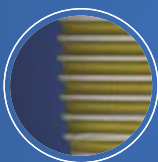

DTD
Doppelgewinde

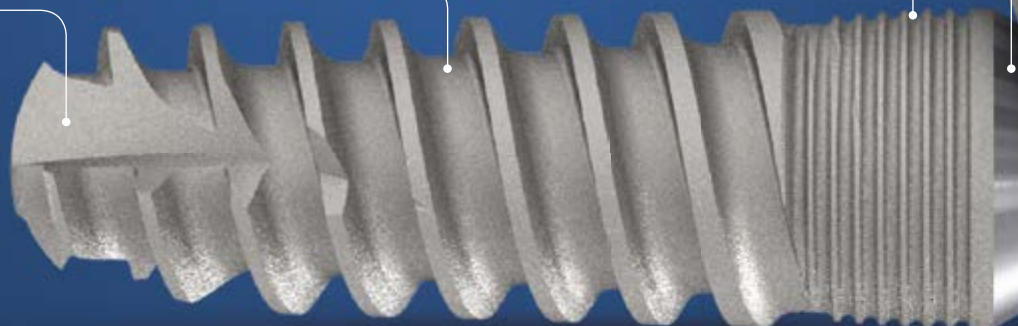



12° Konusverbindung

Hohe Primärstabilität sorgt für reduzierte Mikrobewegungen.

Mikro-Ringe

Höherer BIC (Bone to Implant Contact) für ausgezeichnete Primärstabilität und Bakterienabwehr zur Reduktion des Periimplantitis-Risikos.

DTD (Dual-Thread Design / Komprimierendes Doppelgewinde)

Höherer BIC, bequemes und effizientes Eindrehen.

Zwei Spiralkanäle

Für effizientes Autografting.

Abgerundeter Apex

Für mehr Sicherheit.

Exklusiver MIS DSM (Dual-Stabilitäts-Mechanismus)

Sanfte Kompression im koronalen Drittel des Implantats, beschleunigte Osseointegration im apikalen Drittel mit zwei Spiralkanälen.

MIS Implantatoberfläche

Die Oberflächen von unseren Implantaten werden nach einem von MIS weiter entwickelten Verfahren sandgestrahlt und säuregeätzt. Dadurch erreichen wir eine 100 % reine Oberfläche die eine sichere Osseointegration gewährleistet (lt. Poseido Studie 2014).



Lieferumfang

Implantat + Finalbohrer + Verschluss-schraube + temporäres Abutment

WURZELFÖRMIGES IMPLANTAT MIT 12° KONUSVERBINDUNG


12°
Konusverbindung



Mikro-Ringe



DTD
Doppelgewinde

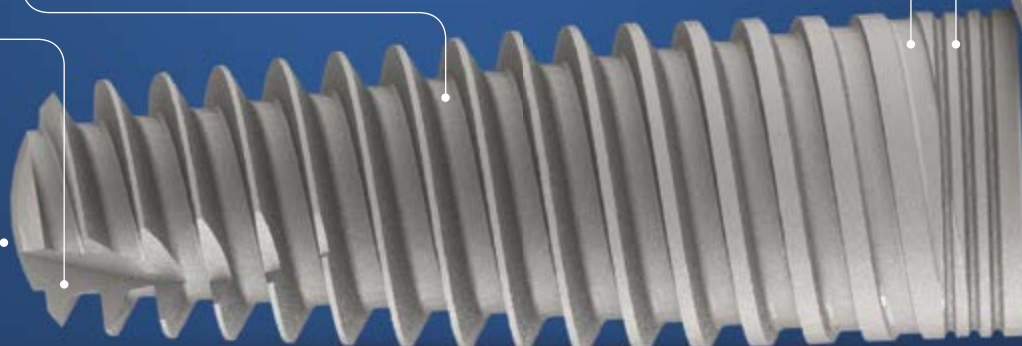



Kompressionsfreie Zone

Durch das einzigartige, dreieckige Design wird mehr Platz für den krestalen Knochen gelassen, bei gleichzeitig hoher Primärstabilität.

12° Konusverbindung

12° Konusverbindung mit integriertem Platform Switching für eine optimale Verteilung der Kaukräfte und hohe Dichte gegen Bakterieneinwanderung.

Mikro-Ringe

Höherer BIC (Bone to Implant Contact) für ausgezeichnete Primärstabilität und Bakterienabwehr zur Reduktion des Periimplantitis-Risikos.

Flachschneidender Apex

Ermöglicht letzte Korrekturen bei hoher Primärstabilität.

MIS Implantatoberfläche

Die Oberflächen von unseren Implantaten werden nach einem von MIS weiter entwickelten Verfahren sandgestrahlt und säuregeätzt. Dadurch erreichen wir eine 100 % reine Oberfläche die eine sichere Osseointegration gewährleistet (lt. Poseido Studie 2014).

MAKE IT SIMPLE ...

NEU!

MIS V3

Das innovative V3 Implantat – für mehr krestalen Knochen. Die Dreiecksform erlaubt eine kompressionsfreie Zone, in der das Blut eine ideale Matrix für die Bildung von neuem Knochen bildet.

Lieferumfang

Implantat + Finalbohrer +
Verschlusschraube

INNOVATIVES IMPLANTATDESIGN FÜR MEHR KRESTALEN KNOCHEN





Flatschneidender
Apex

Mikro-Ringe

12°
Konusverbindung

Kompressionsfreie
Zone

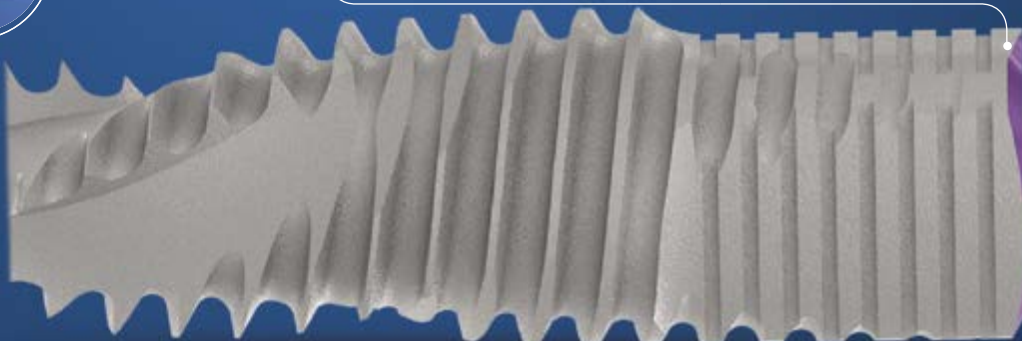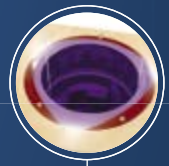

MAKE IT SIMPLE

Medical Implant Systems
MIS

MIS Implants Technologies GmbH. Simeons carré 2. 32423 Minden.
Telefon: 05 71 / 97 27 62 - 0. Telefax: 05 71 / 97 27 62 - 62.
E-Mail: service@mis-implants.de
www.mis-implants.de