



Einfach sicher – doppelt gut: der All-in-one-Airpolisher!



AIRPOLISHING WIRD NOCH EINFAC

Bakterielle Dekontaminierung Zuverlässigkeit

Aktive Verlaufs- Supra
kontrolle Perio Größere

Von Parodontal- Perio Bewegungsfreiheit

Einfach

EINE KOMPLETTE LÖSUNG

Vier Düsen zur aktiven Verlaufskontrolle von Parodontalerkrankungen. Einfach Düse wechseln – ein Handstückwechsel ist nicht nötig.

Pulversorten für jede klinische Situation:

- "CLASSIC"-Pulver auf Basis von Natriumbikarbonat
- "PEARL"-Pulver auf Basis von Kalziumkarbonat



HER MIT

AIR N GO

DOPPELTE FUNKTION

Erleben Sie die neueste Generation Airpolisher-Handys mit Doppelfunktion von ACTEON® EQUIPMENT:

- SUPRA für die prophylaktische supragingivale Politur
- PERIO für subgingivales Polieren: Prävention sowie Behandlung von Parodontalerkrankungen und Periimplantitis

Dieses zahnmedizinische Produkt verbindet Einfachheit mit Leistungsstärke.



- Schnelles Einschalten: Direktverbindung zum Highspeed-Handstückanschluss
- Größere Bewegungsfreiheit: 360°-Drehung; schnelle und zielgenaue Behandlung pflegebedürftiger Zahnflächen
- Einfachere Reinigung des Handstücks durch leichtes Auseinandernehmen

HRE PARTNER BEI DER VORBEUGUNG BEKÄMPFUNG VON PARODONTALERKR

Durch modernste Modelliertechniken in der Fluiddynamik konnten Düsen geschaffen werden, die einen kontinuierlichen, zielgenauen und kontrollierten Sprühwasserstrahl erzeugen – und zwar punktgenau dort, wo Sie ihn benötigen.

Im Praxisalltag lassen sich mithilfe der leistungsstarken AIR-N-GO®-Düsen supra- und subgingivale Biofilme wirksam entfernen.



- Bewährte Lösung für die supragingivale Prophylaxe in Kombination mit den AIR-N-GO®-Pulversorten "CLASSIC" oder "PEARL"
- Garantiert eine schnelle, effiziente Behandlung mit höherem Arbeitskomfort



Klinischer Fall Dr. P. ROUAS (Frankreich)



- Reduzierter Verbrauch von feinteiligem AIR-N-GO® "PERIO"-Pulver in der Erhaltungsphase
- Mukositis-Behandlung für eine klinisch gesunde Mundschleimhaut
- Wirksame Bekämpfung von fortschreitenden Parodontalerkrankungen



Klinischer Fall Dr. C. LIM (U.K.)

UND ANKUNGEN

CASS.

AIR-N-GO® PERIO EASY-DÜSE

(Optional PERIO easy <u>kit)</u>

- Innovatives "Schuhlöffel"-Design zum einfachen subgingivalen Einführen
- Ein echter Pluspunkt bei der nicht-operativen subgingivalen Zahn- und Implantatbehandlung (3 bis 8 mm tiefe Zahnfleischtaschen)
- Behandlungszeit pro Fläche nur 5 Sekunden



Klinischer Fall Dr. C. LIM (U.K.)

AIR-N-GO® PERIO-DÜSE

(Optional)

- Operative und nicht-operative subgingivale Behandlungen (Tunnelierung und Lappen)
- Doppelter seitlicher Sprühwasserstrahl mit hoher Leistungsstärke
- Dekontaminierung tiefer Zahnfleischtaschen (8 bis 10 mm)



Klinischer Fall Dr. A. PATEL (U.K.)

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN FÜR

AIR-N-GO®-Pulver wurden speziell für die wirksame und gleichzeitig sanfte Behandlung von Zahnoberflächen entwickelt und getestet. Alle Pulver sind mit dem AIR-N-GO® easy-Handstück kompatibel, sodass kein Instrumentenwechsel erforderlich ist.

AIR-N-GO® CLASSIC-PULVER

auf Basis von Natriumbikarbonat


(≈ 76µm)

- **Verschiedene Geschmackssorten –** je nach Vorliebe Ihrer Patienten
- Behutsame Reinigung mit sofort sichtbaren Ergebnissen
- Wirksames Entfernen von Verfärbungen und bakterieller Plaque, selbst an schwer zugänglichen Flächen
- Verbesserte Behandlungsakzeptanz: geringere Blutungen, weniger Schmerzen für den Patienten



5 frische Geschmacksrichtungen auf Basis von 100 % natürlichen Aromen oder ätherischen Ölen: Neutral, Cola, Himbeere, Pfefferminze oder Zitrone

MITBEWERBERPRODUKT

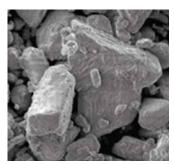


Geschichtete Partikel mit aggressiver Geometrie (x1000)




Behandelter Zahnschmelz weist zahlreiche Kratzer auf (x300)

AIR N GO

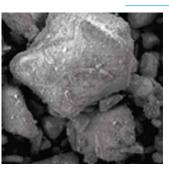

Partikel mit weicherer Geometrie (x1000)

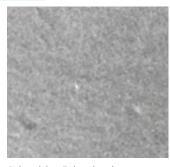

Behandelter Zahnschmelz: die Oberfläche weist keine Kerben oder Kratzer auf (x300)

JEDE KLINISCHE ANFORDERUNG

AIR-N-GO® PEARL-PULVER


auf Basis von natürlichem Kalziumkarbonat

(≈ 55µm)

- Ultra-aktive supragingivale Politur und Schutz von empfindlichem Gewebe
- Verringerung der Übersäuerung infolge von Gewebsentzündungen für eine klinisch gesunde Mundflora
- Wiederherstellung des natürlichen Perlmuttglanzes des Zahnschmelzes
- Rasche und sichere Entfernung von hartnäckigen Verfärbungen und Verbundstoffen



Selbst die schmerzempfindlichsten Patienten mit fortgeschrittener Zahnfleischentzündung profitieren von der Behandlung mit "PEARL".

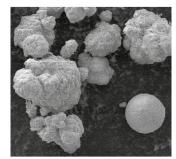

AIR-N-GO® "PEARL" (x1000)

Quelle: ICMCB CNRS (Institute of Condensed Matter Chemistry - French National Centre for Scientific Research) Fotos S.E.M.

AIR-N-GO® PERIO-PULVER

auf Basis von natürlichem Glyzin


(≈ 25µm)

- Einsatz ausschließlich zur subgingivalen Therapie in Ergänzung zur Erstbehandlung
- Optimaler Erhalt der behandelten Oberflächen (Zähne und Implantate) und empfindlicher Bereiche durch die geringe Abrasivität
- Verhindert die Zunahme des subgingivalen Biofilms



Einzigartige Eigenschaften und zahlreiche Vorteile:

- Plaqueentfernung in der parodontalen Erhaltungsphase an freigelegten Wurzeloberflächen ohne Substanzverlust
- Reduktion der Bakterienlast in den Zahnfleischtaschen

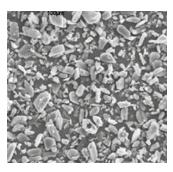

AIR-N-GO® "PERIO" (x1000)





	Düsen	Pulver		Indikationen
GO SUPRA	AIR-N-GO® EASY SUPRA 120° Im Lieferumfang enthalten		"CLASSIC" Auf Basis von Natriumbikarbonat Durchschnittliche Partikelgröße: 76µm GESCHMACKSSORTEN: Neutral, Cola, Himbeere, Pfefferminz und Zitrone	Nachbearbeitung im Anschluss an die Zahnsteinentfernung Vorbereitung für die Zahnweißung Reinigung von Interdentalräumen, Fissuren und Rissen Vorbereitung der Zahnoberfläche für das Ätzen Reinigung von Zahnspangen Entfernen von supragingivalen Biofilmen, Plaque, Verfärbungen und provisorischen Zementresten
			"PEARL" Auf Basis von Kalziumbikarbonat Durchschnittliche Partikelgröße: 55µm GESCHMACK: Neutral	"Ultraschnelle" und sanfte Entfernung von hartnäckigen Verfärbungen und Verbundstoffen Anmerkung: Enthält kein Natrium und kann daher zur Behandlung von schmerzempfindlichen und sich salzarm ernährenden Patienten eingesetzt werden
GO PERIO Zähne und Implantate	AIR-N-GO® PERIO EASY Wird mit dem optionalen PERIO-Kit geliefert AIR-N-GO® PERIO Optional AIR-N-GO® PERIO MAINTENANCE Optional	The state of the s	"PERIO" Auf Basis von Glyzin Durchschnittliche Partikelgröße: 25µm GESCHMACK: Neutral	Entfernung von subgingivalem Biofilm Behandlung von Parodontalerkrankungen und Periimplantitis Taschentiefe: 3 – 8 mm Behandlung von Parodontalerkrankungen und Periimplantitis Taschentiefe: 8 – 10 mm Parodontale Erhaltungsphase Taschentiefe: bis zu 4 mm

Besuchen Sie uns auch im Internet unter: www.de.acteongroup.com



VERKAUFSANGEBOT -

Standard

AIR-N-GO® easy-Koffer: AIR-N-GO® easy-Handstück mit modellabhängigem Adapter (KaVo*, Sirona*, Bien-Air*, W&H*, Midwest*), 1x SUPRA 120° Düse, 1x Kennenlernkit mit 10x "CLASSIC"-Pulversticks in verschiedenen Geschmacksrichtungen und 2x "PEARL"-Pulversticks, 1x AIR-N-GO® easy-Kit zur Instandhaltung und Pflege

*KaVo, Sirona, Bien-Air, W&H und Midwest sind eingetragene Warenzeichen.

Optional

PERIO easy-Kit: AIR-N-GO® PERIO easy-Düse und 1x Flasche mit 160 g AIR-N-GO® "PERIO"-Glyzinpulver Einzellieferung: AIR-N-GO® PERIO-Düse

Einzellieferung: AIR-N-GO® PERIO Maintenance-Düse

ACTEON® Germany GmbH | Klaus-Bungert-Strasse 5 | 40468 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211/16 98 00-0 Fax: +49 211/16 98 00-48 E-Mail: info.de@acteongroup.com | www.acteongroup.com

