



BTI SCAN 3



SOFTWARE
PLANUNGS-SOFTWARE
FÜR DIE ORALE IMPLANTOLOGIE

Human Technology

BTI SCAN 3

BTI SCAN 3: DER OPTIMALE START FÜR EINE ERFOLGREICHE BEHANDLUNG




BTI Scan®3 ist eine Software zur Diagnostik und digitalen Planung von Behandlungen, die eine höhere Qualität und Vorhersagbarkeit (Planbarkeit) von Implantationen ermöglicht.

Dieses Tool bietet Ihnen Simulationen und 3D-Grafiken, die Ihnen zum einen eine präzise und sichere Diagnostik gewährleisten, um die exakte Länge, Breite und Position von BTI-Implantaten bestimmen zu können, und zum anderen die Möglichkeit, Ihren Patienten den Behandlungsplan verständlich darzustellen.


SOFTWARE FÜR DIE DIAGNOSE UND PLANUNG VON EINGRIFFEN IN DEN BEREICHEN IMPLANTOLOGIE UND ORALCHIRURGIE.

NEUHEITEN BTI SCAN 3

1. NEUE MESSWERKZEUGE: BEREICH, WINKEL, VOLUMEN

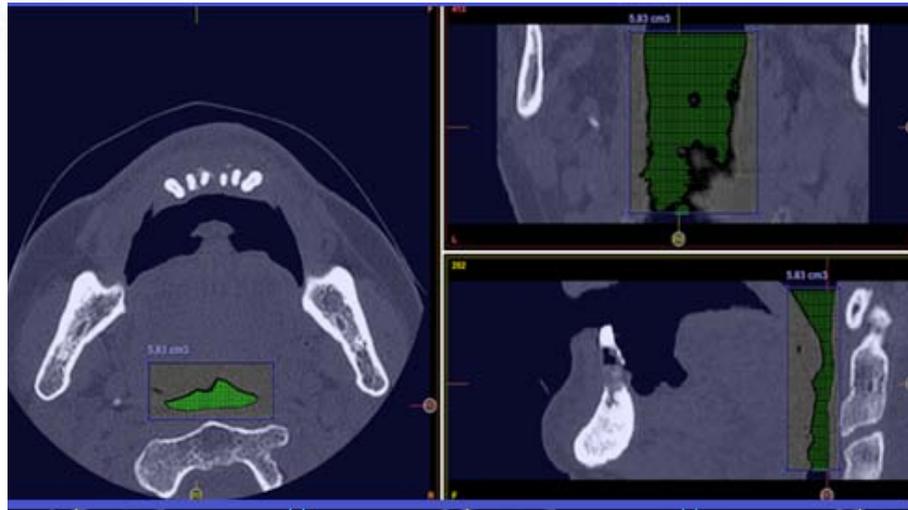


- Bereich und Winkel: Diese Messungen können im Panorama- und Sektionschnittbild durchgeführt werden, um die Implantatchirurgie zu erleichtern.
- Berechnung des Volumens (cm^3) der Implantationskavitäten oder von Knochendefekten.

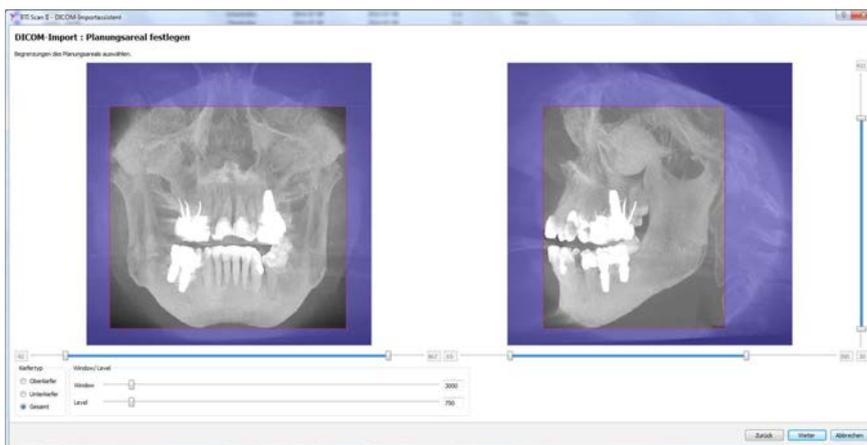

2. HORIZONTALES SCHNITTBILD IM DICOM-IMPORT


- Beim DICOM-Import kann das betreffende Volumen durch Spezifikation des Arbeitsbereichs ausgewählt werden (zwei horizontale Schnittbilder zusätzlich zu der o. g. vertikalen Option).
- Automatische Anpassung der endgültigen Grafik erleichtert die Bildbearbeitung.

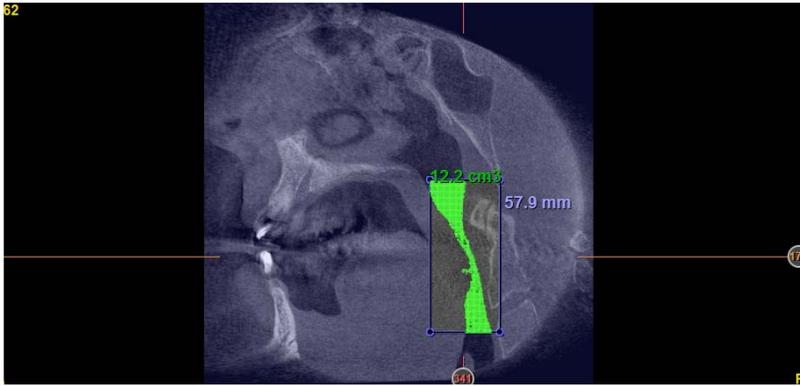


3. SCREENING DER ATEMWEGE

- Für die Identifizierung und Quantifizierung der Verengung der Atemwege zur Diagnose des obstruktiven Schlafapnoe-Syndroms.

4. EINSTELLUNG DER DICHEMESSUNG

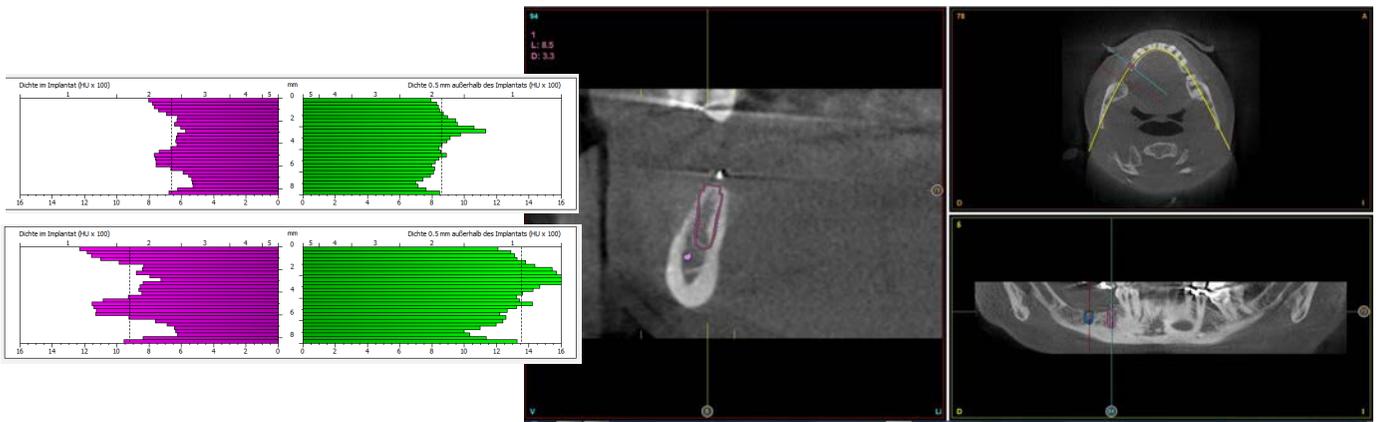


- Das Scannermodell ist wählbar, um so die Auswertung der Dichte in den entsprechenden Grafiken zu optimieren und die Analyse so präzise wie möglich zu gestalten.

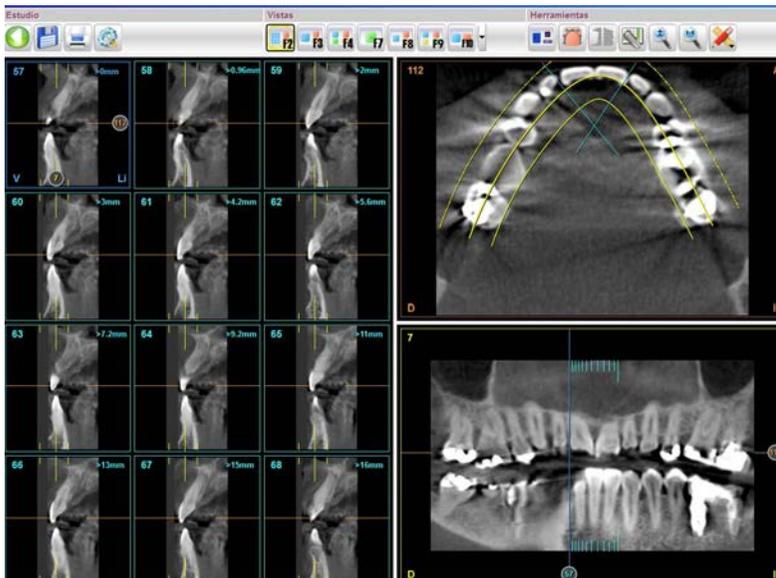

5. RESTYLING

- Größere Grafiken.
- Synchronisierung der sektionalen Schnittbilder entsprechend der Betrachtung des Panoramaschnittbilds.
- Import von Studien aus Vorgängerversionen.
- Kompatibel mit aktuellen Betriebssystemen: Windows 7 und Windows 8.1.

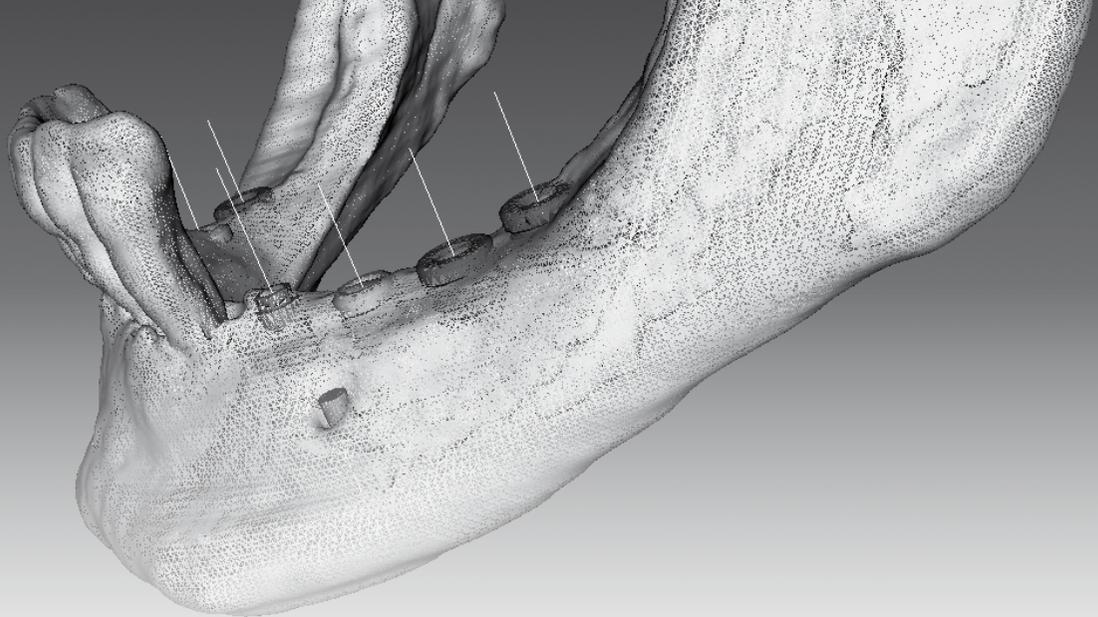

WELCHE VORTEILE BIETET DIE SOFTWARE?

SICHERE UND ERFOLGREICHE EINGRIFFE

Mit BTI Scan® 3 kann die Knochendichte an jedem Punkt des Alveolarknochens innerhalb und außerhalb des einzusetzenden Implantats bestimmt werden. Die Software ermöglicht außerdem eine vollständige Evaluierung der Mundhöhle und ihrer anatomischen Struktur, darunter auch Risikobereiche (z.B. nervus alveolaris inferior), die für eine bessere Sichtbarkeit markiert werden.

EINFACH UND BEQUEM


Das Programm ist einfach und intuitiv bedienbar. Alle Informationen sind leicht zugänglich. Einfache Installation im Netz oder auf einem einzelnen Computer.

MEHR INFORMATIONEN UND VERTRAUEN FÜR IHRE PATIENTEN

Die Technologie BTI Scan® 3 hilft Ihnen mit Simulationen und 3D-Grafiken dabei, Ihren Patienten den Behandlungsplan verständlich zu visualisieren.

ERFÜLLUNG DES DATENSCHUTZGESETZES

Bei der Anwendung der von BTI entwickelten Software wird das Datenschutzgesetz 15/1999 eingehalten.

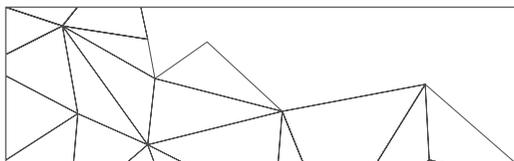

DEMOVIDEO BTI SCAN

SCANNEN SIE DIESEN CODE mit Ihrem Handy ein, um das Video abzurufen (Eigentum von BTI Biotechnology Institute).





BTI Biotechnology Institute
San Antonio, 15 · 5°
01005 Vitoria-Gasteiz
(Álava) · ESPAÑA
Tel.: +34 945 140 024
Fax: +34 945 135 203
pedidos@bticomercial.com

www.bti-biotechnologyinstitute.de

GB

870 The Crescent
Colchester Business Park · Colchester
Essex CO49YQ · United Kingdom
Tel.: (44) 01206580160
Fax: (44) 01206580161
info@bti-implant.co.uk

DEUTSCHLAND

Mannheimer Str. 17
75179 Pforzheim · Deutschland
Tel. +49 (0) 7231 428060
Fax +49 (0) 7231 4280615
info@bti-implant.de

ITALIEN

Piazzale Piola, 1
20131 Mailand · Italien
Tel.: (39) 02 7060 5067
Fax: (39) 02 7063 9876
bti.italia@bti-implant.it

MEXIKO

Ejercito Nacional Mexicano 351, 3A
Col. Granada Delegación Miguel Hidalgo
México DF · CP 11520 · Mexiko
Tel.: (52) 55 52502964
Fax: (52) 55 55319327
bti.mexico@bti-implant.com

PORTUGAL

Praça Mouzinho de Albuquerque, 113, 5°
4100-359 Porto · PORTUGAL
Tel.: (351) 22 120 1373
Fax: (351) 22 120 131
bti.portugal@bticomercial.com

NÄHERE INFORMATIONEN ZU BTI SCAN
BIOTECHNOLOGY INSTITUTE

SCANNEN SIE DIESEN CODE mit Ihrem Handy ein und erfahren
Sie mehr über das **BTI Biotechnology Institute**.

