


ÄSTHETIK- AUFBAUTEN MIT BIO PROFIL



btj.[®]

Human
Technology

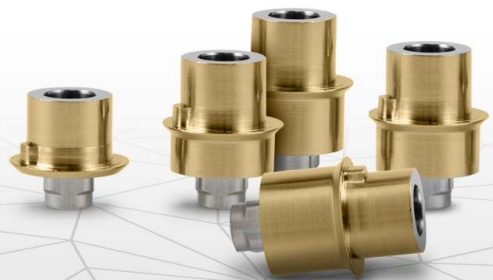

Human Technology

ÄSTHETIK-AUFBAUTEN MIT BIO PROFIL



AUSGEZEICHNETE ÄSTHETIK UND VIELSEITIGKEIT

Neue Linie von Ästhetik-Aufbauten für Direktversorgungen auf Implantaten, mit BIO Profil zur dauerhaften Erhaltung der Gingiva.

Höchste Flexibilität, verwendbar mit oder ohne Gusszylinder, zur Herstellung von konventionellem Zahnersatz und mit CAD/CAM Systemen.

Verfügbar für interne und externe Implantatverbindungen, auf Tiny, Universal und breiten Plattformen (Ancha).

ZUR VERWENDUNG MIT JEDER LABORTECHNIK

GUSSZYLINDER

Hergestellt aus Ertacetal

- Zur konventionellen Weiterverarbeitung im Labor: Presskeramik und Guss.
- Für universale (1) und breite (2) Plattformen (Ancha)



MATERIAL

Hergestellt aus Titan (Ti).

ANTI-ROTATIONS DESIGN

Neuartiges Anti-Rotations Design zur Vereinfachung der prothetischen Arbeit in CAD / CAM

ZWEI VERSIONEN



BIO-PROFIL

Bio Prothetik Profil zur Erhaltung der gingivalen Durchblutung und Risikominimierung gingivalen Rückgangs im ästhetischen Bereich.

AUFBAUVERBINDUNGEN

für interne und externe Aufbauverbindungen.



HÖHEN DES GINGIVALEN AUFBAUBEREICHS

Die BTI Ästhetik Aufbauten sind verfügbar in vier verschiedenen Gingivahöhen: 0, 1, 2, 3, und 4mm.



(1) ROTATIONSGESICHERT

Für einheitliche Prothetik (verschraubt und zementiert) und zur Zementierung mehrgliedriger Restaurationen

(2) NICHT ROTATIONSGESICHERT

für mehrgliedrig verschraubte Restaurationen

PLATTFORMEN

Passend für alle BTI Plattformen:

· schmale Plattform (Tiny)



· Universal Plattform



· Breite Plattform (Ancha)



ANWENDUNGSGEBIETE

VERWENDUNG OHNE GUSSZYLINDER

Für Prothetik designed in CAD/CAM. Die Aufbauten mit präfabrizierten Implantat-Aufbauverbindungen in Titan werden für zementierte Prothetik verwendet. Hierauf können Kunststoffhülsen, Zr, e-max, Ti und Cr-Co modelliert werden.



VERWENDUNG MIT GUSSZYLINDER

Zur Herstellung konventioneller, verschraubter und zementierter Prothetik (Herstellung von Aufbaupfosten).

(1)




(2)



FAKTEN UND VORTEILE

1. EINZELZÄHNE UND MEHRGLIEDRIGE VERSORGUNGEN DIREKT AUF IMPLANTATEN: VERSCHRAUBT ODER ZEMENTIERT
2. SOFORTBELASTUNG AUF EINZELZAHNIMPLANTATEN IM ÄSTHETIKBEREICH

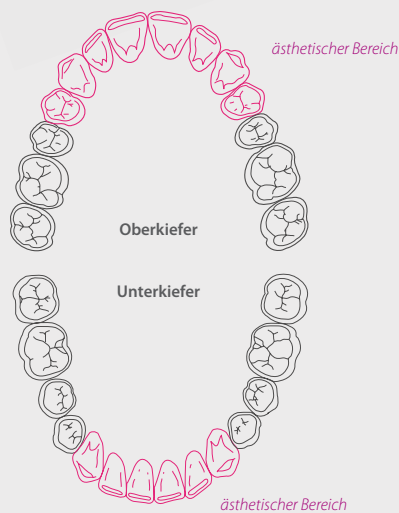

BIO EMERGENZPROFIL ZUR DAUERHAFTEN ERHALTUNG DER GINGIVA

- Ermöglicht die Bildung eines BIO Emergenzprofils, individuell auf den Patienten abgestimmt.
- Vereinfachung der Aufbauherstellung unter enormer Zeitersparnis.
- Hermetischer Spaltverschluss der Implantat-Aufbauprothetik.
- Die Vielseitigkeit der Aufbauhöhen, im gingivalen Bereich, ermöglicht die individuell auf den Patienten abgestimmte Aufbauauswahl.



bti®

Biotechnology
Institute
Human Technology



BTI Biotechnology Institute
San Antonio, 15 · 5º
01005 Vitoria-Gasteiz
(Álava) · SPANIEN
Tel: +34 945 140 024
Fax: +34 945 135 203
pedidos@bticomercial.com

www.bti-biotechnologyinstitute.de

VEREINIGTE STAATEN

1730 Walton Road
Suite 110
Blue Bell, PA 19422-1802 · USA
Tel: (1) 215 646 4067
Fax: (1) 215 646 4066
info@bti-implant.us

VEREINIGTES KÖNIGREICH

870 The Crescent
Colchester Business Park · Colchester
Essex CO49YQ · Vereinigtes Königreich
Tel: (44) 01206580160
Fax: (44) 01206580161
info@bti-implant.co.uk

DEUTSCHLAND

Mannheimer Str. 17
75179 Pforzheim · Deutschland
Tel: (49) 7231 428 06-0
Fax: (49) 7231 428 06-15
info@bti-implant.de

ITALIEN


Piazzale Piola, 1
20131 Milan · Italien
Tel: (39) 02 7060 5067
Fax: (39) 02 7063 9876
bti.italia@bti-implant.it

MEXIKO

Ejercito Nacional Mexicano 351, 3A
Col. Granada Delegación Miguel Hidalgo
México DF · CP 11520 · Mexiko
Tel: (52) 55 52502964
Fax: (52) 55 55319327
bti.mexico@bti-implant.com

PORTUGAL

Praça Mouzinho de Albuquerque 113, 5º
4100-359 Porto · Portugal
Tel: (351) 22 120 1373
Fax: (351) 22 120 1311
bti.portugal@bticomercial.com

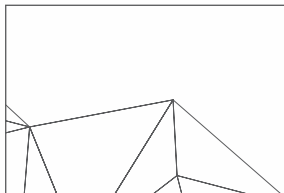

BTI CHIRURGIEKATALOG

BIOTECHNOLOGY INSTITUTE

Scannen Sie diesen Code mit Ihrem Smartphone und erhalten Sie Zugang zu allen Informationen von *BTI Biotechnology Institute*.

