

SYSTEMÜBERSICHT INTERNA



Human Technology

SYSTEMÜBERSICHT

Diese Broschüre bietet dem Anwender einen Überblick über die chirurgischen und prothetischen Möglichkeiten des BTI Implantatsystems.


Unter anderem sind Informationen zum optimalen Bohrprotokoll in Abhängigkeit der Knochendichte und der jeweiligen Implantatdimensionen enthalten.

Darüber hinaus werden die verschiedenen Instrumente und Werkzeuge für die Chirurgie und Prothetik inklusive der Drehmomentratschen und Schraubendreher gezeigt.


Durch die übersichtliche Darstellung lassen sich die verschiedenen Materialien für die chirurgischen und prothetischen Schritte durchgängig nachvollziehen, unabhängig davon, ob man sich für eine Restauration direkt auf Implantatniveau oder mit Distanzhülsen entscheidet, egal ob zementiert oder verschraubt. Alle Komponenten sind samt Artikelnummern und Abmessungen aufgeführt.

BOHRSEQUENZEN FÜR INTERNA® IMPLANTATE


Implantate ø3.3 mm Schmale-Plattform

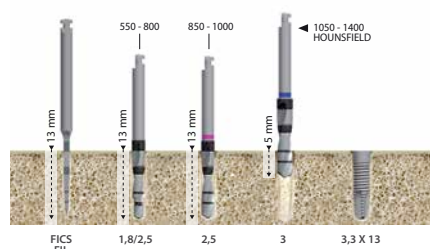


Implantate ø3.3 mm mit Standard-Plattform

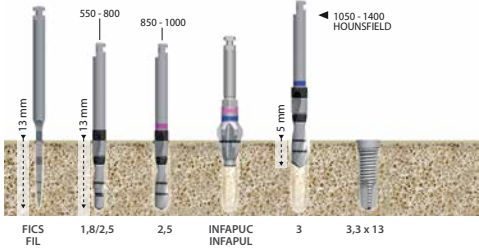


Implantate ø3.5 mm Schmale-Plattform

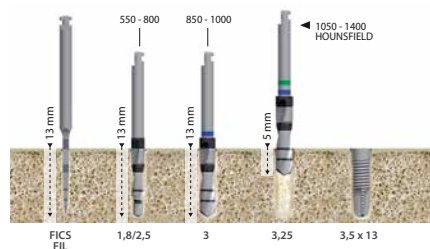


Implantate ø3.5 mm mit Standard-Plattform

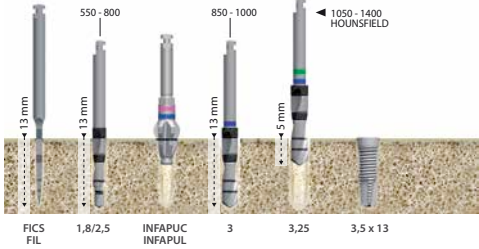


Implantate ø3.75 mm Schmale-Plattform

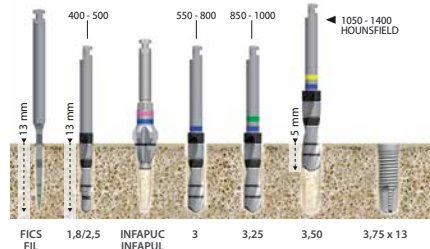


Implantate ø3.75 mm mit Standard-Plattform

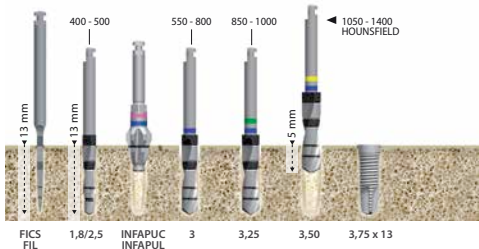

Implantate ø4.0 mm mit Standard-Plattform

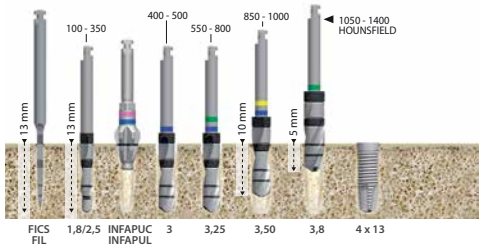


Implantate ø4.25 mm mit Standard-Plattform

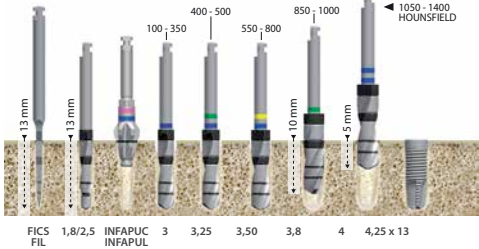


BOHRSEQUENZEN FÜR INTERNA® IMPLANTATE


Plus Implantate ø4.5 mm mit Standard-Plattform

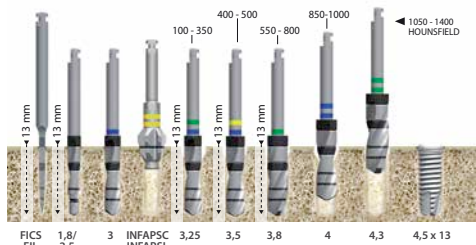


Plus Implantate ø5.0 mm mit Standard-Plattform

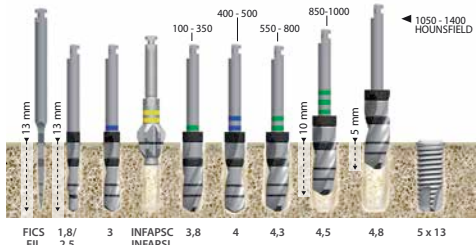


Plus Implantate ø5.5 mm mit Standard-Plattform

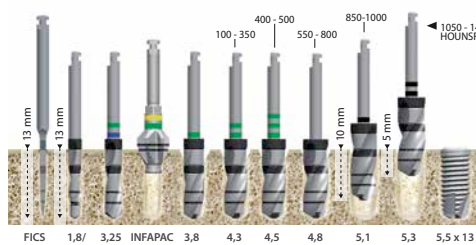


Plus Implantate ø 5,5mm EXTRA-KURZE

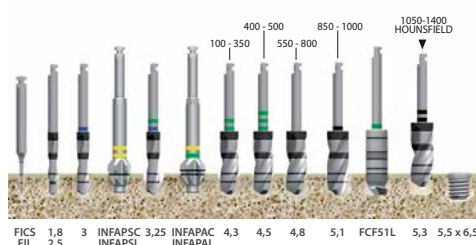


Implantate ø5.0 mm mit 5.5 mm Plattform

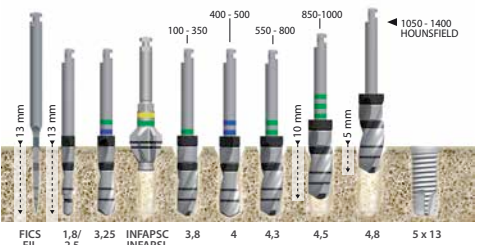


Implantate ø5.5 mm mit 5.5 mm Plattform

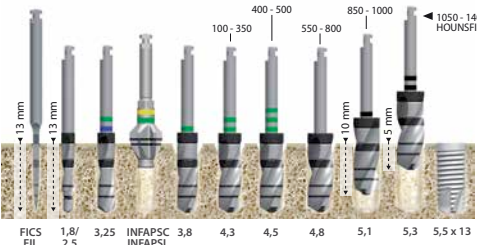

Implantate ø6.0 mm mit 5.5 mm Plattform

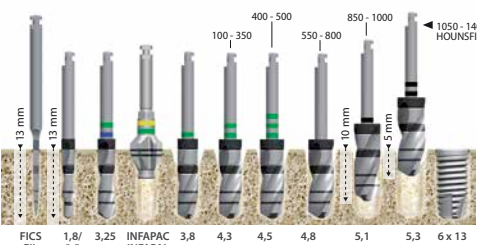

Implantate ø6.25 mm mit 5.5 mm Plattform

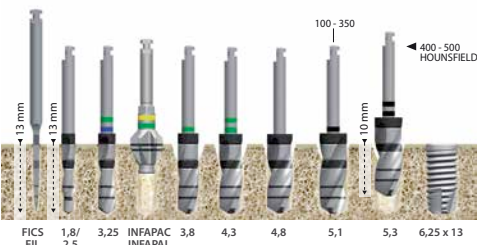

POSITIONEN DER LASERMARKIERUNGEN



Klasse	Hounsfield
I	1050 - 1400
II	850 - 1000
III	550 - 800
IV	400 - 500
V	100 - 350

BOHRER	UMDREHUNGSAHLE	KÜHLUNG
Initialbohrer	800 - 1.000 U/min	ja
Spiralbohrer	50 - 75 U/min	nein
Versenker	150 - 200 U/min	nein

Initialbohrer



Art. - Nr.	Länge
FICS	8 mm
FIL	15 mm

Spiralbohrer



Art. - Nr.	Ø(mm)	Länge
F18CS	1.8	13 mm
F18LS	1.8	18 mm
F1825CS	1.8 > 2.5	13 mm
F1825LS	1.8 > 2.5	18 mm
F25CS	2.5	13 mm
F25LS	2.5	18 mm
F30CS	3.0	13 mm
F30LS	3.0	18 mm
F32CS	3.25	13 mm
F32LS	3.25	18 mm
F35CS	3.5	13 mm
F35LS	3.5	18 mm
F38CS	3.8	13 mm
F38LS	3.8	18 mm
F40CS	4.0	13 mm
F40LS	4.0	18 mm
F43CS	4.3	13 mm
F43 LS	4.3	18 mm
F45CS	4.5	13 mm
F45LS	4.5	18 mm
F48CS	4.8	13 mm
F48LS	4.8	18 mm
F51CS	5.1	13 mm
F53CS	5.3	13 mm

Versenker



Art. - Nr.	Standard-Plattform kurz	Standard-Plattform lang	Externa/Interna Plus kurz	Externa/Interna Plus lang	5.5mm Plattform kurz	5.5mm Plattform lang	Ø(mm)	Länge
INFAPUC							4.1	5 mm
INFAPUL							4.1	5 mm
INFAPSC							4.5	4.5 mm
INFAPSL							4.5	4.5 mm
INFAPAC							5,5 und 6	4,5 und 5,5mm
INFAPAL							5,5 und 6	4,5 und 5,5mm

Bohrer mit frontaler Schneide



Art. - Nr.	Ø(mm)	Länge
FCF30L	3.0	13 mm
FCF35L	3.5	13 mm
FCF45L	4.5	13 mm
FCF51L	5.1	13 mm

Einmalbohrer-Sets



Art. - Nr.	Ø(mm)	Länge
KFD1	Initial Pilot 1.8 > 2.5 mm Pilot 2.5 > 3.0 mm	15 mm 18 mm 18 mm
KFD2	Initial Pilot 1.8 > 2.5 mm Pilot 2.5 > 3.0 mm Pilot 3.2 > 3.8 mm	15 mm 18 mm 18 mm 18 mm

BTI Mehrweg-Bohrer

BTI Einmal-Bohrer

BTI Crest Expansoren

KAMMSPREIZUNG

Tiny® Implantate ø 3.3 mm.

Tiny® Implantate ø 3.5 mm.

Tiny® Implantate ø 3.75 mm.

KNOCHENVERDICHUNG

Implantate ø 3.3 mm mit Standard-Plattform

Implantate ø 3.75 mm mit Standard-Plattform

Implantate ø 5.0 mm mit 5.5 mm Plattform

17 mm

1,4 mm 1,9 mm 2,6 mm

8,5 mm 10 mm 13 mm 15 mm

1 2 3 4

ø 2 mm Expansor I ø 2,6 mm Expansor II ø 3,1 mm Expansor Knochenverdichter Elevator III ø 3,8 mm Expansor Knochenverdichter Elevator IV

BTI Crest-Expansoren

JEXP Artikel



Inhalt
Instrument Nr. 1. lang
Instrument Nr. 2. lang
Instrument Nr. 3. lang
Instrument Nr. 4. lang
Winkelstückeinsatz, lang
Ratscheneinsatz, lang
Metall-Box

Ø Apex	Ø Körper	Länge
1.4 mm	2.0 mm	15 mm
1.6 mm	2.6 mm	15 mm
2.1 mm	3.1 mm	15 mm
2.8 mm	3.8 mm	15 mm



JCOM Artikel



Inhalt
Instrument Nr. 1. kurz
Instrument Nr. 2. kurz
Instrument Nr. 3. kurz
Instrument Nr. 4. kurz
Winkelstückeinsatz, kurz
Ratscheneinsatz, kurz
Metall-Box, rot

Ø Apex	Ø Körper	Länge
1.4 mm	2.0 mm	11.5 mm
1.6 mm	2.6 mm	11.5 mm
2.1 mm	3.1 mm	11.5 mm
2.8 mm	3.8 mm	11.5 mm



KEXCO Artikel




Inhalt
Initialbohrer, kurz
Inhalt JEXP (ohne Metall-Box)
Inhalt JCOM (ohne Metall-Box)
Kunststoff-Box

IET




Art. - Nr.	Ø(mm)	Länge
IET2585	2.5	8,5 mm
IET2511	2.5	11,5 mm
IET3085	3.0	8,5 mm
IET3011	3.0	11,5 mm

Expansions-Implantate Ø2,5mm

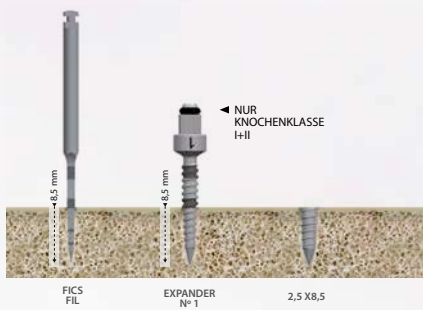

Expansions-Implantate Ø3,0mm

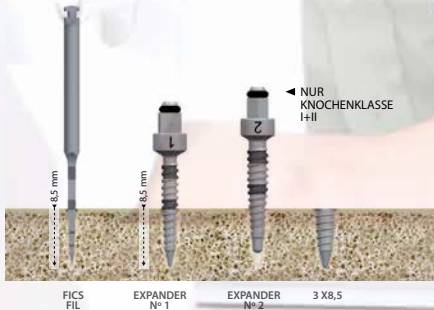

BTI Expansions-Implantate

Zubehör für Chirurgie und Prothetik

Chirurgische Ratsche



Artikel

Art. - Nr.

Inhalt

LLMQ

Chirurgische Drehmoment-Ratsche
20 - 70 Ncm

Schraubendreher



Artikel

Sechskant-Schraubendreher
(großer Sechskant)

Art. - Nr.

DHG17
DHG24
DHG36

Länge

17 mm
24 mm
36 mm

Vierkant-Schraubendreher

DC17
DC24
DC36

17 mm
24 mm
36 mm

Distanzhülsen-Schraubendreher

DCE17
DCE24

17 mm
24 mm

Locator Multi-Werkzeug

HPL

Sechskant-Schraubendreher
(kleiner Sechskant)

ACHTUNG! Nur für TINY® Deckschrauben
und kopflose Deckschrauben!

DHP24

24 mm

Drehmomentratschen
Prothetik



Artikel

Art. - Nr.

Drehmoment

Multi-Drehmomentratsche
inkl. Adapter für
Drehmomentratschen-Einsätze und
Winkelstück-Einsätze (MDPT1 und LLEC1)

LLMTP

10 - 35 Ncm

Drehmomentratschen-Einsätze



Winkelstück-Einsätze



Zubehör für Chirurgie und Prothetik

Artikel

Sechskant
(großer Sechskant)

Art. - Nr.
PTH22

Länge
22 mm

Vierkant

PTC16
PTC22

16 mm
22 mm

Sechskant
(großer Sechskant, parallelwandig)

PTHS16
PTHS22

16 mm
22 mm

Vierkant
parallelwandig

PTCS16
PTCS22

16 mm
22 mm

Sechskant (kleiner Sechskant)
ACHTUNG! Nur für TINY® Deckschrauben und
kopflose Deckschrauben

PTHP16
PTHP22

16 mm
22 mm

Für Distanzhülsen
ACHTUNG! Nur für die 5,5 mm Plattform

PTUA16
PTUA22

16 mm.
22 mm.

Für Distanzhülsen

PTTU16
PTTU22

16 mm
22 mm

Abgerundet
für reduzierte Schraubenköpfe
Zum Ausgleich von Divergenzen von 0 bis 15°

PTHA16
PTHA22
PTHA28
PTHA34

16 mm
22 mm
28 mm
34 mm

Sechskant abwinkelbar
Zum Ausgleich von Divergenzen von 15 bis 30°

PTHB16
PTHB22
PTHB28
PTHB34

16 mm
22 mm
28 mm
34 mm

Für Locator-Abutments

PTTL15
PTTL21

15 mm
21 mm

Für Dal-Bo Abutments

PTDO

16 mm

Handgriff für Ratscheneinsätze

MDPT1

Artikel

Sechskant
(großer Sechskant)

Art. - Nr.
PHG17
PHG24
PHG30

Länge
17 mm
24mm
30 mm

Vierkant

PDC17
PDC24
PDC30

17 mm
24 mm
30 mm

Für Multi im / Unit Narrow und Standard Abutments

PDTU17
PDTU24
PDTU30

17 mm.
24 mm.
30 mm.

Für Locator-Abutments

PTL23
PTL29

23 mm
29 mm

Für Titanmagnetics

TIXL-LLT

Sechskant (kleiner Sechskant)
ACHTUNG! Nur für TINY® Deckschrauben und
kopflose Deckschrauben

PHP24

24 mm

Schlitz
ACHTUNG! Exklusiv für Interna® Gingivaformer

PDP24

24 mm

Handgriff für Winkelstück-Einsätze

LLEC1



Art. - Nr.	Ø	Länge
IIPECA3375	3.3	7.5 mm
IIPECA3385	3.3	8.5 mm
IIPECA3310	3.3	10 mm
IIPECA3311	3.3	11.5 mm
IIPECA3313	3.3	13 mm
IIPECA3315	3.3	15 mm

Art. - Nr.	Ø	Länge
IIPECA3555	3.5	5.5 mm
IIPECA3565	3.5	6.5 mm
IIPECA3575	3.5	7.5 mm
IIPECA3585	3.5	8.5 mm
IIPECA3510	3.5	10 mm
IIPECA3511	3.5	11.5 mm
IIPECA3513	3.5	13 mm
IIPECA3515	3.5	15 mm

Art. - Nr.	Ø	Länge
IIPECA3755	3.75	5.5 mm
IIPECA3765	3.75	6.5 mm
IIPECA3775	3.75	7.5 mm
IIPECA3785	3.75	8.5 mm
IIPECA3710	3.75	10 mm
IIPECA3711	3.75	11.5 mm
IIPECA3713	3.75	13 mm
IIPECA3715	3.75	15 mm



Ø Implantat

Dieser Abschnitt zeigt den Folgeablauf zur Auswahl der benötigten provisorischen und definitiven Komponenten für zementierte und verschraubte Einzelkronen sowie mehrgliedrige Versorgungen.

Gingivaformer



Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPCER31	3,5	1mm
INPCER32	3,5	2mm
INPCER33	3,5	3mm
INPCER34	3,5	4mm
INPCER35	3,5	5mm
INPCER42	4,5	2mm
INPCER43	4,5	3mm
INPCER44	4,5	4mm

20 Ncm

Reduziert Gingivaformer



Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPCERRE33	3,5-2	3 mm
INPCERRE34	3,5-2	4 mm

20 Ncm.

Abformpfosten



Pick - Up - Typ (mit Rotationsschutz)		
Art. - Nr.	Ø	Höhe
INCIE3	3,5	12mm
INCIE4	4,5	12mm

Laboranalog



Art. - Nr.
INRLIE

Prov. Zylinder Titan



Art. - Nr.
INCPIE0 (ohne Rotationsschutz)
INCPIE1 (mit Rotationsschutz)

Prov. Zylinder Kunststoff



Art. - Nr.
INCPIEP0 (ohne Rotationsschutz)
INCPIEP1 (mit Rotationsschutz)

Titan - Bioabutment® (Ti Golden)



Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPPTEB43	4,2	3
INPPTEB44	4,2	4

Titan - Bioabutment® 15° (Ti Golden)



Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPPTEAB43	3,75/4,2	3
INPPTEAB44	3,75/4,2	4
INPPTEAB45	3,75/4,2	5

UCLA - Abutment



Art. - Nr. (Kunststoff)
INPUCE1 (mit Rotationsschutz)
INPUCE0 (ohne Rotationsschutz)

Ästhetik Abutment (Ti Golden)



(mit Rotationsschutz)		
Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPETZ0	3,5	0mm
INPETZ1	3,5	1mm
INPETZ2	3,5	2mm
INPETZ3	3,5	3mm
INPETZ4	3,5	4mm



Art. - Nr. (ausbrennbare Hülse)
CPETZ

Aufwachsschraube



Art. - Nr.
INTEIU16 (kurz)
INTEIU (lang)

Laborschraube



Art. - Nr.
INTTLH (5 St.) (Sechskant)

Halteschrauben



Gold
Art. - Nr.
INTOOC (Vierkant)
35 Ncm



Ti Black
Art. - Nr.
INTTUH (Sechskant)
35 Ncm



Ti Black
Art. - Nr.
INTTUHR (Sechskant mit reduziertem Schraubenkopf)
Zum Ausgleich von Divergenzen von 0 bis 15°
20 Ncm



Ti Black
Art. - Nr.
INTTUH30 Zum Ausgleich von Divergenzen von 15 bis 30°
20 Ncm

Achtung: Sechskant nur
kompatibel mit PTHBXX



Dieser Abschnitt zeigt den Folgeablauf zur Auswahl der benötigten provisorischen und definitiven Komponenten für verschraubte, mehrgliedrige Versorgungen auf MULTI-IM Distanzhülsen und Cover-Denture Restaurationen.

INDIREKTE RESTAURATIONEN MIT **UNIT** TRANSEPITHELIAL (Einzelzahnversorgung)

UNIT Distanzhülse
(Ti Golden)

Art. - Nr.	Höhe
INTMIUPE20	2,0 mm.
INTMIUPE30	3,0 mm.
INTMIUPE40	4,0 mm.
35 Ncm.	

Schutzkappe für
UNIT Distanzhülse

Art. - Nr.	Ø
TPMIUPU	4,0
10 Ncm	

Abformpfosten für
UNIT Distanzhülse

Art. - Nr.
CIMIUPU

Laboranalog für
UNIT Distanzhülse

Art. - Nr.
RLMIUPU

Prov. Zylinder für
UNIT Distanzhülse

Art. - Nr. (ti)
CPMIUPU
Art. - Nr. (Kunststoff)
CPMIUPUP

Ästhetik Abutment
für UNIT Distanzhülse

Art. - Nr.
PTZMIUPU
PTZMIUPUL

Ausbrennbare Hülse

Art. - Nr.
CPTZMIUPU

Zylinder (Kunststoff)
für UNIT Transepithelial

Art. - Nr.
PUCMIUPU

Aufwachsschraube für
MULTI-IM®/UNIT® Distanzhülse

Art. - Nr.	Höhe
TEMIR (reduzierter Durchmesser)	15 mm

Halteschrauben Sechskant
MULTI-IM®/UNIT® Zylinder

Ti Black Art. - Nr.
TTMIR (Sechskant, reduzierter Schraubenkopf) Zum Ausgleich von Divergenzen von 0 bis 15° 20 Ncm

Ti Black Art. - Nr.
TTMI30 (Sechskant) Zum Ausgleich von Divergenzen von 15 bis 30° 20 Ncm

Achtung: Sechskant nur
kompatibel mit PTHBXX

INDIREKTE RESTAURATIONEN MIT **MULTI-IM** TRANSEPITHELIAL (Mehrgliedrige Versorgung)

MULTI-IM® Distanzhülse
(Ti Golden)

Art. - Nr.	Höhe
INTMIPE10	1,0 mm.
INTMIPE20	2,0 mm.
INTMIPE30	3,0 mm.
INTMIPE40	4,0 mm.
INTMIPE50	5,0 mm.
35 Ncm.	

Schutzkappe für
MULTI-IM® Distanzhülse

Art. - Nr.	Ø	Höhe
TPMIEU	4,0	4,0 mm.
TPMIEU1	4,0	3,0 mm.

Abformpfosten für
MULTI-IM® Distanzhülse

Pick - Up - Typ	Ø
Art. - Nr. CIMIEU	4.0

Registrierpfosten

Art. - Nr.	Ø	Höhe
IROMIEU1	4.0	6 mm
IROMIEU	4.0	9 mm


Laboranalog
für MULTI-IM® Distanzhülse

Art. - Nr.
RLMIEU

Prov. Zylinder
für MULTI-IM® Distanzhülse

Art. - Nr. (Ti)
CPMIEU
Art. - Nr. (Kunststoff)
CPMIEUP

Steggelenke
für Provisorien auf MULTI-IM

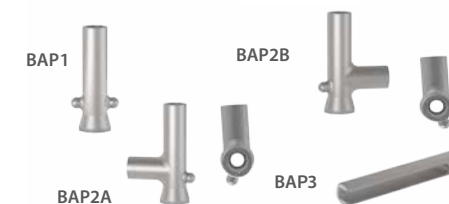

Zylinder für MULTI-IM®
Distanzhülse

Art. - Nr. (Gold)
COMIEU
Art. - Nr. (Kunststoff)
CCMIEU
Art. - Nr. (Ti f. CAD/CAM)
CZMIEU

COVER - DENTURE RESTAURATIONEN

Gingivaformer

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPCER31	3,5	1mm
INPCER32	3,5	2mm
INPCER33	3,5	3mm
INPCER34	3,5	4mm
INPCER35	3,5	5mm
INPCER42	4,5	2mm
INPCER43	4,5	3mm
INPCER44	4,5	4mm
20 Ncm.		

Reduziert Gingivaformer

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPCERRE33	3,5-2	3 mm
INPCERRE34	3,5-2	4 mm
20 Ncm.		

Abformpfosten

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INCIE3	3,5	12mm
INCIE4	4,5	12mm

Laboranalog

Art. - Nr.
INRLIE

Locator Distanzhülse

Art. - Nr.	Höhe
PLIE10	1 mm.
PLIE20	2 mm.
PLIE30	3 mm.
PLIE40	4 mm.
30 Ncm.	

Abformpfosten

Art. - Nr.
CIL (4 Stück)

Locator Analog

Art. - Nr.
RLL4 (4 Stück)


**Locator
Bearbeitungs-Set**

Art. - Nr.
JML2 (2 Stück)
JML10 (10 Stück)

Locator Retentionseinsätze

Art. - Nr.	Retention	Angulation
MLRA (4 St.)	x-tra leicht	0-10°
MLRR (4 St.)	leicht	0-10°
MLST (4 St.)	stark	0-10°
MLAR (4 St.)	x-tra leicht	10-20°
MLAN (4 St.)	leicht	10-20°
MLAV (4 St.)	stark	10-20°
MLAG (4 St.)	ohne Retention	10-20°

Ø Kragen
Ø Implantat

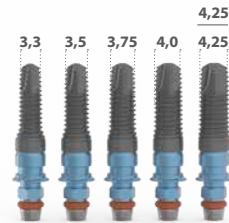

Ø Kragen
Ø Implantat



Art. - Nr.	Ø	Länge
IIPUCA3385	3.3	8.5 mm
IIPUCA3310	3.3	10.0 mm
IIPUCA3311	3.3	11.5 mm
IIPUCA3313	3.3	13.0 mm
IIPUCA3315	3.3	15.0 mm
Art. - Nr.	Ø	Länge
IIPUCA3555	3.5	5.5 mm
IIPUCA3565	3.5	6.5 mm
IIPUCA3575	3.5	7.5 mm
IIPUCA3585	3.5	8.5 mm
IIPUCA3510	3.5	10.0 mm
IIPUCA3511	3.5	11.5 mm
IIPUCA3513	3.5	13.0 mm
IIPUCA3515	3.5	15.0 mm

Art. - Nr.	Ø	Länge
IIPUCA3755	3.75	5.5 mm
IIPUCA3765	3.75	6.5 mm
IIPUCA3775	3.75	7.5 mm
IIPUCA3785	3.75	8.5 mm
IIPUCA3710	3.75	10.0 mm
IIPUCA3711	3.75	11.5 mm
IIPUCA3713	3.75	13.0 mm
IIPUCA3715	3.75	15.0 mm

Art. - Nr.	Ø	Länge
IIPUCA4055	4.0	5.5 mm
IIPUCA4065	4.0	6.5 mm
IIPUCA4075	4.0	7.5 mm
IIPUCA4085	4.0	8.5 mm
IIPUCA4010	4.0	10.0 mm
IIPUCA4011	4.0	11.5 mm
IIPUCA4013	4.0	13.0 mm
IIPUCA4015	4.0	15.0 mm

Art. - Nr.	Ø	Länge
IIPUCA4255	4.25	5.5 mm
IIPUCA4265	4.25	6.5 mm
IIPUCA4275	4.25	7.5 mm
IIPUCA4285	4.25	8.5 mm
IIPUCA4210	4.25	10.0 mm
IIPUCA4211	4.25	11.5 mm
IIPUCA4213	4.25	13.0 mm
IIPUCA4215	4.25	15.0 mm



Art. - Nr.	Ø	Länge
IIPSCA4555	4.5	5.5 mm
IIPSCA4565	4.5	6.5 mm
IIPSCA4575	4.5	7.5 mm
IIPSCA4585	4.5	8.5 mm
IIPSCA4510	4.5	10.0 mm
IIPSCA4511	4.5	11.5 mm
IIPSCA4513	4.5	13.0 mm
IIPSCA4515	4.5	15.0 mm

Art. - Nr.	Ø	Länge
IIPSCA5055	5.0	5.5 mm
IIPSCA5065	5.0	6.5 mm
IIPSCA5075	5.0	7.5 mm
IIPSCA5085	5.0	8.5 mm
IIPSCA5010	5.0	10.0 mm
IIPSCA5011	5.0	11.5 mm
IIPSCA5013	5.0	13.0 mm
IIPSCA5015	5.0	15.0 mm

Art. - Nr.	Ø	Länge
IIPSCA5555	5.5	5.5 mm
IIPSCA5565	5.5	6.5 mm
IIPSCA5575	5.5	7.5 mm
IIPSCA5585	5.5	8.5 mm
IIPSCA5510	5.5	10.0 mm
IIPSCA5511	5.5	11.5 mm
IIPSCA5513	5.5	13.0 mm

Dieser Abschnitt zeigt den Folgeablauf zur Auswahl der benötigten provisorischen und definitiven Komponenten für zementierte und verschraubte Einzelkronen sowie mehrgliedrige Versorgungen.

Gingivaformer

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPCUR41	4.0	1 mm
INPCUR42	4.0	2 mm
INPCUR43	4.0	3 mm
INPCUR44	4.0	4 mm
INPCUR45	4.0	5 mm
INPCUR46	4.0	6 mm
INPCUR48	4.0	8 mm

	INPCUR52	5.0	2 mm
	INPCUR53	5.0	3 mm
	INPCUR54	5.0	4 mm
	INPCUR55	5.0	5 mm
	INPCUR56	5.0	6 mm
	INPCUR58	5.0	8 mm

Expandierter Gingivaformer

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPCUREX45	4-6	5 mm
INPCUREX46	4-6	6 mm
INPCUREX47	4-6	7 mm

Reduziert Gingivaformer

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPCURRE43	4,0-2,5	3 mm
INPCURRE44	4,0-2,5	4 mm

Abformpfosten



Offener Abformlöffel (mit Rotationsschutz)		
Art. - Nr.	Ø	Höhe
INCIIU41	4.0	9 mm
INCIIU4	4.0	12 mm
INCIIU51	5.0	9 mm
INCIIU5	5.0	12 mm



(ohne Rotationsschutz)		
Art. - Nr.	Ø	Höhe
INCIRIU51	5.0	9 mm
INCIRIU5	5.0	12 mm



Geschlossener Abformlöffel		
Art. - Nr.	Ø	Höhe
INCIDU2	4.0	2 mm
INCIDU3	4.0	3 mm
INCIDU4	4.0	4 mm
SID (5 Stück)		

Laboranalog



Art. - Nr.
INRLIU

Prov. Zylinder Titan



Art. - Nr.
INCPUI1 (mit Rotationsschutz)
INCPUI0 (ohne Rotationsschutz)

Prov. Bioabutment®



Art. - Nr.	Ø	Höhe
INCPUIB13	5.0	3 mm
INCPUIB14	5.0	4 mm
(mit Rotationsschutz)		
INCPUIB03	5.0	3 mm
INCPUIB04	5.0	4 mm
(ohne Rotationsschutz)		

Prov. Zylinder



Art. - Nr.
INCPUIP1 (mit Rotationsschutz)
INCPUIP0 (ohne Rotationsschutz)

Prov. Abutment Kunststoff



Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPPUP44	4.0	4 mm
INPPUP54	5.0	4 mm

Gold - Abutment



Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPPOU42	4.1	2 mm
INPPOU44	4.1	4 mm
INPPOU52	5.0	2 mm
INPPOU54	5.0	4 mm

Titan-Abutment



Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPPTU42	4.1	2 mm
INPPTU44	4.1	4 mm
INPPTU52	5.0	2 mm
INPPTU53	5.0	3 mm
INPPTU54	5.0	4 mm
INPPTU56	5.0	6 mm
INPPTU62	6.0	2 mm
INPPTU63	6.0	3 mm
INPPTU64	6.0	4 mm

Titan-Abutment 15°



Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPPTUA52	5.0	2 mm
INPPTUA54	5.0	4 mm

Titan Abutment 15° (anatomisch)



Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPPTUA42	4.3/5.0	2 mm
INPPTUA44	4.3/5.0	4 mm

Titan-Bioabutment (Ti Golden)



Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPPTUB53	5.0	3 mm
INPPTUB54	5.0	4 mm
INPPTUB55	5.0	5 mm

Titan-Bioabutment 15° (Ti Golden)



Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPPTUAB53	5.0	3 mm
INPPTUAB54	5.0	4 mm
INPPTUAB55	5.0	5 mm

CERAMIC-ON® Abutment



Art. - Nr. (gold)	Ø
INPPCOU	5.0
Art. - Nr. (Titan)	Ø
INPPCTU	5.0

Ästhetik-Abutment (Ti Golden)



(mit Rotationsschutz)		
Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPUTZ0	4.1	0 mm
INPUTZ1	4.1	1 mm
INPUTZ2	4.1	2 mm
INPUTZ3	4.1	3 mm
INPUTZ4	4.1	4 mm



(ohne Rotationsschutz)		
Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPUTZ0	4.1	0 mm
INPUTZ1	4.1	1 mm
INPUTZ2	4.1	2 mm
INPUTZ3	4.1	3 mm
INPUTZ4	4.1	4 mm



Art. - Nr. (ausbrennbare Hülse)		
CPUTZ		(Universal)

UCLA - Abutment



Art. - Nr. (Gold)		
INPUOU1 (mit Rotationsschutz)		
INPUOU0 (ohne Rotationsschutz)		



Art. - Nr. (Kunststoff)		
INPUCU1 (mit Rotationsschutz)		
INPUCU0 (ohne Rotationsschutz)		

Aufwachsschraube



Art. - Nr.
INTEIU16 (kurz)
INTEIU (lang)

Laborschraube



Art. - Nr.
INTTLH (5Stück) (Sechskant)

Halteschrauben



Gold
Art. - Nr.
INTOOC (Vierkant)
35 Ncm



Ti Black
Art. - Nr.
INTTUH (Sechskant)
35 Ncm




Ti Black
Art. - Nr.
INTTUHR (Sechskant mit reduziertem Schraubenkopf)
Zum Ausgleich von Divergenzen von 0 bis 15°
20 Ncm



Ti Black
Art. - Nr.
INTTUH30 (Zum Ausgleich von Divergenzen von 15 bis 30°)
20 Ncm

Achtung: Sechskant nur
kompatibel mit PTHBXX

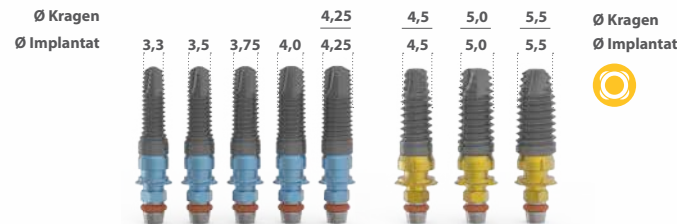

Dieser Abschnitt zeigt den Folgeablauf zur Auswahl der benötigten provisorischen und definitiven Komponenten für verschraubte, mehrgliedrige Versorgungen auf MULTI-IM Distanzhülsen und Cover-Denture Restaurationen.

INDIREKTE RESTAURATIONEN MIT UNIT TRANSEPITHELIAL (Einzelzahnversorgung)

UNIT Distanzhülse (Ti Golden)

Art. - Nr.	Höhe
INTMIUPU20	2,0 mm.
INTMIUPU30	3,0 mm.
INTMIUPU40	4,0 mm.
INTMIUPU50	5,0 mm.
35 Ncm.	

Erweiterung UNIT Distanzhülse (Ti Golden)

Art. - Nr.	Höhe
INTMIUPEX20	2,0 mm.
INTMIUPEX30	3,0 mm.
INTMIUPEX40	4,0 mm.
35 Ncm.	

WICHTIG: diese Erweiterung UNIT Distanzhülse ist für Komponenten der 5,5 mm Plattform konzipiert. **ACHTUNG!** Spezieller Ratscheneinsatz erforderlich. Art.-Nr. PTUA

INDIREKTE RESTAURATIONEN MIT MULTI-IM TRANSEPITHELIAL (Mehrgliedrige Versorgung)

MULTI-IM Distanzhülse (Ti Golden)

Art. - Nr.	Höhe
INTMIPU05	0,5 mm
INTMIPU10	1,0 mm
INTMIPU20	2,0 mm
INTMIPU25	2,5 mm
INTMIPU30	3,0 mm
INTMIPU40	4,0 mm
INTMIPU50	5,0 mm
35 Ncm	

Erweiterung MULTI-IM Distanzhülse (Ti Golden)

Art. - Nr.	Höhe
INTMIPUEX20	2 mm
INTMIPUEX30	3 mm
INTMIPUEX40	4 mm
INTMIPUEX50	5 mm
35 Ncm	

WICHTIG: diese Erweiterung MULTI-IM Distanzhülse ist für Komponenten der Ø5,5mm Plattform konzipiert.

MULTI-IM Distanzhülse 17° (Ti Golden)

Art. - Nr.	Höhe
INTMIPUA15	1,5 mm
INTMIPUA20	2,0 mm
INTMIPUA30	3,0 mm
INTMIPUA40	4,0 mm
INTMIPUA50	5,0 mm
35 Ncm	
INTMIPUB15	1,5 mm
INTMIPUB20	2,0 mm
INTMIPUB30	3,0 mm
INTMIPUB40	4,0 mm
INTMIPUB50	5,0 mm
35 Ncm	

Schutzkappe MULTI-IM 17°

Art. - Nr.	Ø
TPMIEUA	5,0
10 Ncm	

Abformpfosten MULTI-IM 17°

Offener Abformlöffel	Art. - Nr.	Ø
	CIMIPEUA	5,0
Registrierpfosten		
Art. - Nr.	Ø	
IROMIEUA	4,0	


Laboranalog für MULTI-IM 17°

Art. - Nr.	
RLMIEUA	

Prov. Zylinder für MULTI-IM Distanzhülse

Art. - Nr. (Ti)	
CPMIPEU	
Art. - Nr. (Kunststoff)	
CPMIPEUP	

Steggelenke für Provisorien auf MULTI-IM

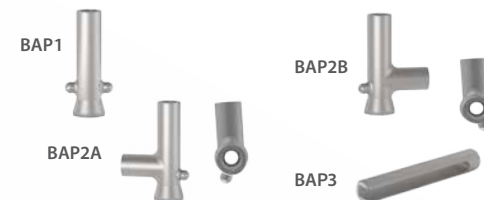

Prov. Zylinder für MULTI-IM 17°

Art. - Nr. (Ti)	
CPMIPEUA	

Ästhetik Abutment für UNIT Distanzhülse

Art. - Nr.	
PTZMIUPU	
PTZMIUPUL	

Ausbrennbare Hülse

Art. - Nr.	
CPTZMIUPU	

Zylinder (Kunststoff) für UNIT Transepithelial

Art. - Nr.	
PUCMIUPU	

Zylinder für MULTI-IM Distanzhülse

Art. - Nr. (Gold)	
COMIPEU	
Art. - Nr. (Kunststoff)	
CCMIPEU	
Art. - Nr. (Ti f. CAD/CAM)	
CZMIPEU	

Aufwachsschraube für MULTI-IM®/UNIT® Distanzhülse

Art. - Nr.	Höhe
TEMIR	15 mm
(reduzierter Durchmesser)	

Halteschrauben Sechskant MULTI-IM®/UNIT® Zylinder

Ti Black	Art. - Nr.
TTMIR	
(Sechskant, reduzierter Schraubenkopf)	
Zum Ausgleich von Divergenzen von 0 bis 15°	
20 Ncm	

Ti Black	Art. - Nr.
TTMI30	
(Sechskant)	
Zum Ausgleich von Divergenzen von 15 bis 30°	
20 Ncm	

Achtung: Sechskant nur kompatibel mit PTHBXX



Dieser Abschnitt zeigt den Folgeablauf zur Auswahl der benötigten provisorischen und definitiven Komponenten für verschraubte, mehrgliedrige Versorgungen auf MULTI-IM Distanzhülsen und Cover-Denture Prothesen.

COVER-DENTURE RESTAURATIONEN



Gingivaformer

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPCUR41	4.0	1 mm
INPCUR42	4.0	2 mm
INPCUR43	4.0	3 mm
INPCUR44	4.0	4 mm
INPCUR45	4.0	5 mm
INPCUR46	4.0	6 mm
INPCUR48	4.0	8 mm
INPCUR52	5.0	2 mm
INPCUR53	5.0	3 mm
INPCUR54	5.0	4 mm
INPCUR55	5.0	5 mm
INPCUR56	5.0	6 mm
INPCUR58	5.0	8 mm
20 Ncm		



Expandierter Gingivaformer

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPCUREX45	4-6	5 mm
INPCUREX46	4-6	6 mm
INPCUREX47	4-6	7 mm
20 Ncm.		



Reduziert Gingivaformer

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPCURRE43	4,0-2,5	3 mm
INPCURRE44	4,0-2,5	4 mm
20 Ncm.		



Abformpfosten

Offener Abformlöffel
(mit Rotationsschutz)

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INCIIU41	4.0	9 mm
INCIIU4	4.0	12 mm
INCIIU51	5.0	9 mm
INCIIU5	5.0	12 mm

(ohne Rotationsschutz)

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INCIRIU51	5.0	9 mm
INCIRIU5	5.0	12 mm

Geschlossener Abformlöffel

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INCIDU2	4.0	2 mm
INCIDU3	4.0	3 mm
INCIDU4	4.0	4 mm

SID (5 Stück)



Laboranalog

Art. - Nr.
INRLIU



Locator Abutment

Art. - Nr.	Höhe
PLIU10	1 mm
PLIU20	2 mm
PLIU30	3 mm
PLIU40	4 mm
30 Ncm	



Dalbo Abutment

Art. - Nr.	Höhe
INMTD2	2 mm
INMTD3	3 mm
INMTD4	4 mm
20 Ncm	



Titanmagnetics

Art. - Nr.	Ø	Höhe
TIXL-4835IU	4.8	3.5 mm
20 Ncm		



Locator Abformpfosten

Art. - Nr.
CIL (4 Stück)



Dalbo Matrizen

Art. - Nr.
HTDS (standard)
HTDP (plus)



Locator Analog

Art. - Nr.
RLL4 (4 Stück)



Locator Bearbeitungs-Set

Art. - Nr.
JML2 (2 Stück)
JML10 (10 Stück)



Magnet für Deckprothese

Art. - Nr.	Höhe
TIXL-S265	2.65 mm



Positionierhilfe

Art. - Nr.
TIXL-MPS



Locator Retentionseinsätze

Art. - Nr.	Retention	Angulation
MLRA (4 St.)	x-tra leicht	0-10°
MLRR (4 St.)	leicht	0-10°
MLST (4 St.)	stark	0-10°
MLAR (4 St.)	x-tra leicht	10-20°
MLAN (4 St.)	leicht	10-20°
MLAV (4 St.)	stark	10-20°
MLAG (4 St.)	ohne Retention	10-20°




Art. - Nr.	Ø	Länge
IIPACA5055	5.0	5.5 mm
IIPACA5065	5.0	6.5 mm
IIPACA5075	5.0	7.5 mm
IIPACA5085	5.0	8.5 mm
IIPACA5010	5.0	10.0 mm
IIPACA5011	5.0	11.5 mm
IIPACA5013	5.0	13.0 mm
IIPACA5015	5.0	15.0 mm

Art. - Nr.	Ø	Länge
IIPACA5555	5.5	5.5 mm
IIPACA5565	5.5	6.5 mm
IIPACA5575	5.5	7.5 mm
IIPACA5585	5.5	8.5 mm
IIPACA5510	5.5	10.0 mm
IIPACA5511	5.5	11.5 mm
IIPACA5513	5.5	13.0 mm
IIPACA5515	5.5	15.0 mm

Art. - Nr.	Ø	Länge
IIPACA6055	6.0	5.5 mm
IIPACA6065	6.0	6.5 mm
IIPACA6075	6.0	7.5 mm
IIPACA6085	6.0	8.5 mm
IIPACA6010	6.0	10.0 mm
IIPACA6011	6.0	11.5 mm
IIPACA6013	6.0	13.0 mm

Art. - Nr.	Ø	Länge
IIPACA6255	6.25	5.5 mm
IIPACA6265	6.25	6.5 mm
IIPACA6275	6.25	7.5 mm
IIPACA6285	6.25	8.5 mm

Es können auch Prothetikteile der INTERNA Standard Plattform verwendet werden (platform switching)

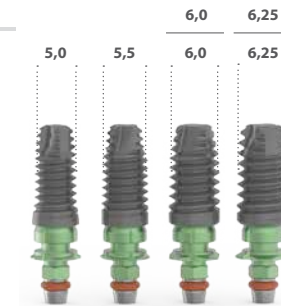

Ø Kragen

Ø Implantat

Dieser Abschnitt zeigt den Folgeablauf zur Auswahl der benötigten provisorischen und definitiven Komponenten für zementierte und verschraubte Einzelkronen sowie mehrgliedrige Versorgungen.

Gingivaformer

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPCAR51	5.5	1 mm
INPCAR52	5.5	2 mm
INPCAR53	5.5	3 mm
INPCAR54	5.5	4 mm
INPCAR55	5.5	5 mm
INPCAR56	5.5	6 mm
INPCAR58	5.5	8 mm

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPCAR62	6.5	2 mm
INPCAR63	6.5	3 mm
INPCAR64	6.5	4 mm
INPCAR65	6.5	5 mm

20 Ncm

Expandierter Gingivaformer

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPCAREX55	5,5-7	5 mm
INPCAREX56	5,5-7	6 mm
INPCAREX57	5,5-7	7 mm

20 Ncm

Abformpfosten



Offener Abformlöffel (mit Rotationsschutz)		
Art. - Nr.	Ø	Höhe
INCIIA51	5.5	9 mm
INCIIA5	5.5	12 mm
INCIIA61	6.5	9 mm
INCIIA6	6.5	12 mm



(ohne Rotationsschutz)		
Art. - Nr.	Ø	Höhe
INCIRIA51	5.5	9 mm
INCIRIA5	5.5	12 mm



Geschlossener Abformlöffel		
Art. - Nr.	Ø	
INCIDA	5.5	

Laboranalog



Art. - Nr.
INRLIA

Prov. Zylinder Titan



Art. - Nr.
INCPIA1 (mit Rotationsschutz)



INCPIA0 (ohne Rotationsschutz)

Prov. Zylinder Kunststoff



Art. - Nr.
INCPIAP1 (mit Rotationsschutz)

Titan-Abutment (Ti Golden)



Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPPTA52	5.5	2 mm
INPPTA54	5.5	4 mm
INPPTA56	5.5	6 mm



Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPPTA62	6.5	2 mm
INPPTA64	6.5	4 mm
INPPTA66	6.5	6 mm



Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPPTA74	7.5	4 mm

Titan-Abutment 15° (Ti Golden)



Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPPTAA52	5.5	2 mm
INPPTAA54	5.5	4 mm

Ästhetik Abutment (Ti Golden)



Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPATZ0	5.5	0 mm
INPATZ2	5.5	2 mm
INPATZ3	5.5	3 mm
INPATZ4	5.5	4 mm



Art. - Nr. (ausbrennbare Hülse)
CPATZ

UCLA - Abutment



Art. - Nr. (Gold)	
INPUOA1 (mit Rotationsschutz)	
INPUOA0 (ohne Rotationsschutz)	



Art. - Nr. (Kunststoff)	
INPUCA0 (ohne Rotationsschutz)	

Aufwachsschraube



Art. - Nr.
INTEIU16 (kurz)
INTEIU (lang)

Laborschraube



Art. - Nr.
INTTLH (5 Stück) (Sechskant)

Halteschrauben



Gold Art. - Nr.
INTOOC (Vierkant)
35 Ncm



Ti Black Art. - Nr.
INTTUH (Sechskant)
35 Ncm




Ti Black Art. - Nr.
INTTUHR (Sechskant mit reduziertem Schraubenkopf)
Zum Ausgleich von Divergenzen von 0 bis 15°
20 Ncm



Ti Black Art. - Nr.
INTTUH30
Zum Ausgleich von Divergenzen von 15 bis 30°
20 Ncm

Achtung: Sechskant nur kompatibel mit PTHBXX

	Art. - Nr.	ø	Länge	Art. - Nr.	ø	Länge	Art. - Nr.	ø	Länge	Art. - Nr.	ø	Länge
	IIPACA5055	5.0	5.5 mm	IIPACA5555	5.5	5.5 mm	IIPACA6055	6.0	5.5 mm	IIPACA6255	6.25	5.5 mm
	IIPACA5065	5.0	6.5 mm	IIPACA5565	5.5	6.5 mm	IIPACA6065	6.0	6.5 mm	IIPACA6265	6.25	6.5 mm
	IIPACA5075	5.0	7.5 mm	IIPACA5575	5.5	7.5 mm	IIPACA6075	6.0	7.5 mm	IIPACA6275	6.25	7.5 mm
	IIPACA5085	5.0	8.5 mm	IIPACA5585	5.5	8.5 mm	IIPACA6085	6.0	8.5 mm	IIPACA6285	6.25	8.5 mm
	IIPACA5010	5.0	10.0 mm	IIPACA5510	5.5	10.0 mm	IIPACA6010	6.0	10.0 mm			
	IIPACA5011	5.0	11.5 mm	IIPACA5511	5.5	11.5 mm	IIPACA6011	6.0	11.5 mm			
	IIPACA5013	5.0	13.0 mm	IIPACA5513	5.5	13.0 mm	IIPACA6013	6.0	13.0 mm			
	IIPACA5015	5.0	15.0 mm	IIPACA5515	5.5	15.0 mm						

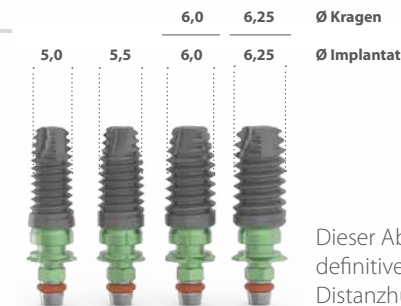


Dieser Abschnitt zeigt den Folgeablauf zur Auswahl der benötigten provisorischen und definitiven Komponenten für verschraubte, mehrgliedrige Versorgungen auf MULTI-IM Distanzhülsen und Cover-Denture Restaurationen.

INDIREKTE RESTAURATIONEN MIT **UNIT** TRANSEPITHELIAL (Einzelzahnversorgung)



INDIREKTE RESTAURATIONEN MIT **MULTI-IM** TRANSEPITHELIAL (Mehrgliedrige Versorgung)

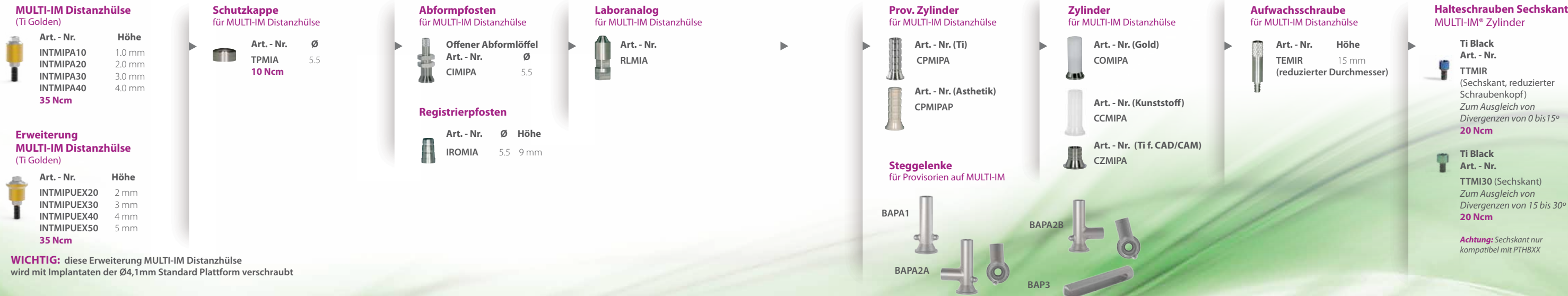




Art. - Nr.	ø	Länge
IIPACA5055	5.0	5.5 mm
IIPACA5065	5.0	6.5 mm
IIPACA5075	5.0	7.5 mm
IIPACA5085	5.0	8.5 mm
IIPACA5010	5.0	10.0 mm
IIPACA5011	5.0	11.5 mm
IIPACA5013	5.0	13.0 mm
IIPACA5015	5.0	15.0 mm

Art. - Nr.	ø	Länge
IIPACA5555	5.5	5.5 mm
IIPACA5565	5.5	6.5 mm
IIPACA5575	5.5	7.5 mm
IIPACA5585	5.5	8.5 mm
IIPACA5510	5.5	10.0 mm
IIPACA5511	5.5	11.5 mm
IIPACA5513	5.5	13.0 mm
IIPACA5515	5.5	15.0 mm

Art. - Nr.	ø	Länge
IIPACA6055	6.0	5.5 mm
IIPACA6065	6.0	6.5 mm
IIPACA6075	6.0	7.5 mm
IIPACA6085	6.0	8.5 mm
IIPACA6010	6.0	10.0 mm
IIPACA6011	6.0	11.5 mm
IIPACA6013	6.0	13.0 mm

Art. - Nr.	ø	Länge
IIPACA6255	6.25	5.5 mm
IIPACA6265	6.25	6.5 mm
IIPACA6275	6.25	7.5 mm
IIPACA6285	6.25	8.5 mm

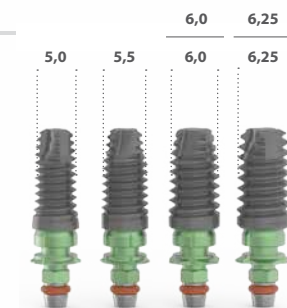

Ø Kragen
Ø Implantat

Dieser Abschnitt zeigt den Folgeablauf zur Auswahl der benötigten provisorischen und definitiven Komponenten für verschraubte, mehrgliedrige Versorgungen auf MULTI-IM Distanzhülsen und Cover-Denture Restaurationen.

COVER-DENTURE RESTAURATIONEN

Gingivaformer



Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPCAR51	5,5	1 mm
INPCAR52	5,5	2 mm
INPCAR53	5,5	3 mm
INPCAR54	5,5	4 mm
INPCAR55	5,5	5 mm
INPCAR56	5,5	6 mm
INPCAR58	5,5	8 mm



INPCAR62	6,5	2 mm
INPCAR63	6,5	3 mm
INPCAR64	6,5	4 mm
INPCAR65	6,5	5 mm

20 Ncm

Expandierter Gingivaformer



Art. - Nr.	Ø	Höhe
INPCAREX55	5,5-7	5 mm
INPCAREX56	5,5-7	6 mm
INPCAREX57	5,5-7	7 mm

20 Ncm

Abformpfosten



Offener Abformlöffel (mit Rotationsschutz)

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INCIIA51	5,5	9 mm
INCIIA5	5,5	12 mm
INCIIA61	6,5	9 mm
INCIIA6	6,5	12 mm



(ohne Rotationsschutz)

Art. - Nr.	Ø	Höhe
INCIRIA51	5,5	9 mm
INCIRIA5	5,5	12 mm



Geschlossener Abformlöffel

Art. - Nr.	Ø
INCIDA	5,5

Laboranalog



Art. - Nr.
INRLIA

Dalbo Abutment



Art. - Nr.	Höhe
INMTD2	2 mm
INMTD3	3 mm
INMTD4	4 mm

20 Ncm

Dalbo Matrize



Art. - Nr.
HTDS (standard)
HTDP (plus)



BTI Comercial

San Antonio, 15 · 5º
01005 Vitoria-Gasteiz
(Álava) · ESPAÑA
Tel: +34 945 140 024
Fax: +34 945 135 203
pedidos@bticomercial.com

Niederlassungen

USA
1730 Walton Road
Suite 110
Blue Bell, PA 19422-1802 · USA
Tel: (1) 215 646 4067
Fax: (1) 215 646 4066
info@bti-implant.us

UK
870 The Crescent
Colchester Business Park · Colchester
Essex CO49YQ · Regno Unito
Tel: (44) 01206580160
Fax: (44) 01206580161
info@bti-implant.co.uk

DEUTSCHLAND
Mannheimer Str. 17
75179 Pforzheim · Deutschland
Tel. +49 (0) 7231 428060
Fax +49 (0) 7231 4280615
info@bti-implant.de

B.T.I.

Biotechnology Institute S.L.
Parque Tecnológico de Álava
Leonardo da Vinci, 14
01510 Miñano (Álava) España
bti.implantes@bti-implant.es

ITALIEN

Piazzale Piola, 1
20131 Milano · Italia
Tel: (39) 02 7060 5067
Fax: (39) 02 7063 9876
bti.italia@bti-implant.it

MEXICO

Ejército Nacional Mexicano 351, 3A
Col. Granada Delegación Miguel Hidalgo
Messico DF · CP 11520 · Messico
Tel: (52) 55 52502964
Fax: (52) 55 55319327
bti.mexico@bti-implant.com

PORTUGAL

Praça Mouzinho de Albuquerque, 113, 5º
4100-359 Porto · Portugal
Tel: (351) 22 120 1373
Fax: (351) 22 120 1311
bti.portugal@bticomercial.com

VERTRIEB

KROATIEN

Tel: 00385-1-58-013-02
bti@ortho-plan.com
www.ortho-plan.com

GRIECHENLAND

Tel: 00302109248055
export@bti-implant.es

JAPAN

Tel: 81-(0)3-3833-3986
ueki@mu-trade.com

LITAUEN

Tel. +370 5 2136648
Tel. +370 652 29991
info@mpdental.lt

RUMÄNIEN

Tel: (40) 769 059 900
office@dent-a-america2000.ro
www.dent-a-america2000.ro

RUSSLAND

Tel. +7 499-640-83-64
s.krikorian@surgitech.ru
www.surgitech.ru

UKRAINE

Tel. +380 (73) 031 31 31
info@biotechmedical.com.ua
www.biotechmedical.com.ua

RUSSLAND

Tel.: (+8) 232 41 00 36
ulibka132@rambler.ru
www.smile132.by

KOLUMBIEN

Tel: +57 (316) 742-6872
viglesias@rocol.com.co
www.rocol.com.co

MAROKKO

Tel.: +212 661 880 824
innovativedentalmaroc@gmail.com

TAIWAN

Tel.: +886-2-2647-9077
kevin_lin@smart-linkx.com.tw

www.bti-biotechnologyinstitute.de

Hinweis: Fragen Sie Ihren Vertriebs Händler nach der Verfügbarkeit der Produkte in den verschiedenen Filialen.

Diese Legende zeigt Symbole und Farbco-
dierungen, die in diesem Katalog verwen-
det werden:



Kompatibel mit Interna® Schmale-Plattform



Kompatibel mit Interna® Universal-Plattform



Kompatibel mit Interna® Plus Implantaten



Kompatibel mit Interna® Ø 5,5mm Plattform



Kompatibel mit Expansions-Implantaten



BTI APP
NEUE PRODUKTE

iPhone / smartphone -Version
iPad / Tablets -Version (Kundenzugang Privat)